



PROCÉDURE D'INSTALLATION JULIE SERVEUR

Distributeur / Client

Date dernière modification document : 25/06/2020

Réf : PR-Manuel-installserv-2006-01-A

Ce document technique détaillé vous permet de connaître en fonction des installations les différentes configurations possibles afin d'appréhender et adapter au mieux l'installation du logiciel Julie

Bonne Installation

Table des matières

1. Configuration matériel minimale requise :	2
2. Recommandations diverses	2
3. Procédure installation JULIE SERVEUR	3
3.2. Etapes d'installation :	4
4. Informations diverses :	9
4.1 Partage du dossier contenant les données JULIE.....	9
4.2 Information relatif aux pare-feu et antivirus	11
4.3 Marquage CE	11

1. Configuration matériel minimale requise :

	Configuration Minimale
CPU	I5
Mémoire	4Go
Disque Dur	500Go
Carte réseau	1GB/s
OS	Windows 10 (32 bits ou 64 bits)

2. Recommandations diverses

- Un réseau Wifi ou CPL de mauvaise qualité peut provoquer des dysfonctionnements de l'application.
- Le réseau applicatif de gestion du cabinet (incluant Julie) doit être isolé des réseaux de streaming.
- L'utilisation d'application de streaming (téléphonie ip, vidéo, musique) nécessite une configuration spécifique (capacité processeur du routeur, sous réseau dédié, application de QOS).
- L'environnement de bureau à distance Windows (RDP) n'est pas compatible avec la clé de sécurité du logiciel

Version Word compatible en 32 bits seulement : 2003/2007/2010/2013/2016

Attention : Les installations ne répondant pas aux critères demandés ne pourront être pris en charge par le service technique JULIE en cas de problème. En cas d'utilisation du service JULIE BACKUP il est indispensable nous préciser le chemin des données du cabinet.


3. Procédure installation JULIE SERVEUR

3.1. Prérequis :


- CDROM d'installation JULIE,
- Clé de protection du logiciel JULIE
- Un ordinateur installé selon la configuration requise.
- **Sous Windows 10 :**
Mettre en place le réseau Windows (groupe de travail Windows identique sur tous les postes)
- Créer un dossier c:\partage, en accès complet.

3.2. Etapes d'installation :

- Insérez le CDrom dans le lecteur
- Cliquez sur « Exécuter autorun.EXE »

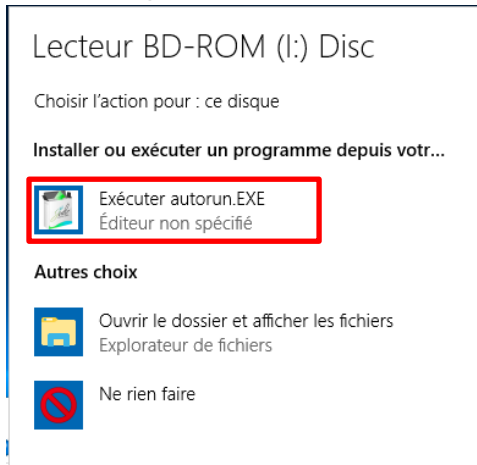

- Cliquez sur « Installations »

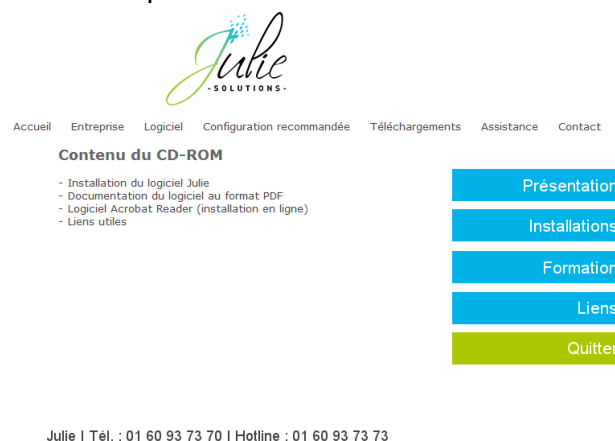


- Cliquez sur l'icône « JULIE »




- Cliquez sur « Suivant »



- Veuillez prendre connaissance et accepter le contrat de licence pour continuer

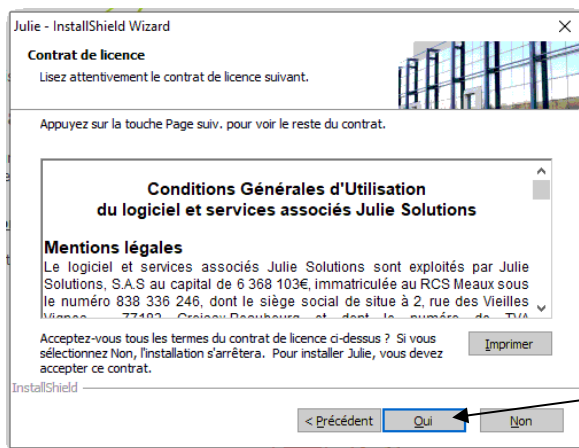

- Vérifiez le chemin du programme et des données, cliquez sur modifier pour installer le serveur de clé et cliquez sur « Suivant »

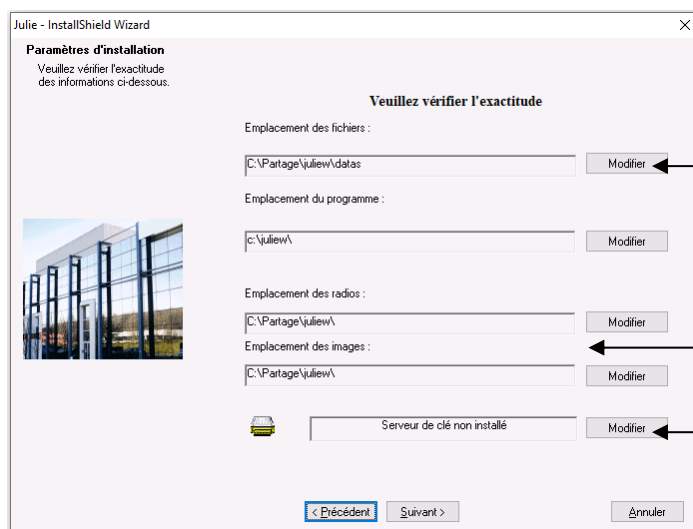


Dans l'emplacement des données, indiquez l'emplacement du dossier de partage comprenant le dossier « Datas »

Les emplacements des radios et images s'adaptent à l'emplacement des fichiers mais peuvent être indépendants

Le serveur de clé doit être installé sur le poste serveur si la clé est connectée dessus

Vérifiez les informations dans la fenêtre et cliquez sur suivant :

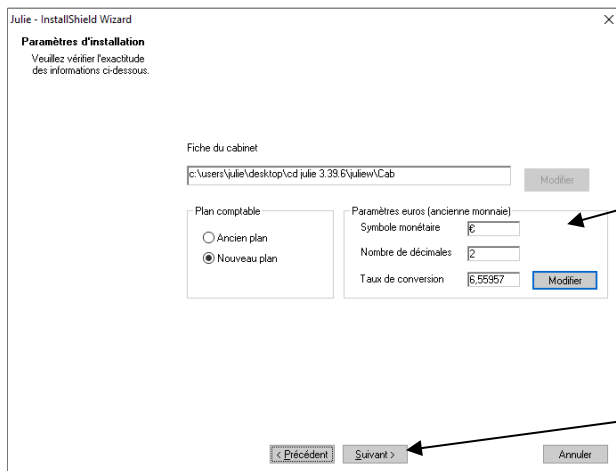

Julie - InstallShield Wizard

Paramètres d'installation
Veuillez vérifier l'exactitude des informations ci-dessous.


Fiche du cabinet
c:\users\julie\Desktop\cd julie 3.99.6\juliew\Cab [Modifier]

Plan comptable
 Ancien plan
 Nouveau plan

Paramètres euros (ancienne monnaie)
 Symbole monétaire €
 Nombre de décimales 2
 Taux de conversion 6.55957 [Modifier]

< Précédent [Suivant > Annuler

- Contrôlez que le numéro de licence corresponde bien à celui noté sur le feuillet joint à la commande et cliquez sur « Suivant »

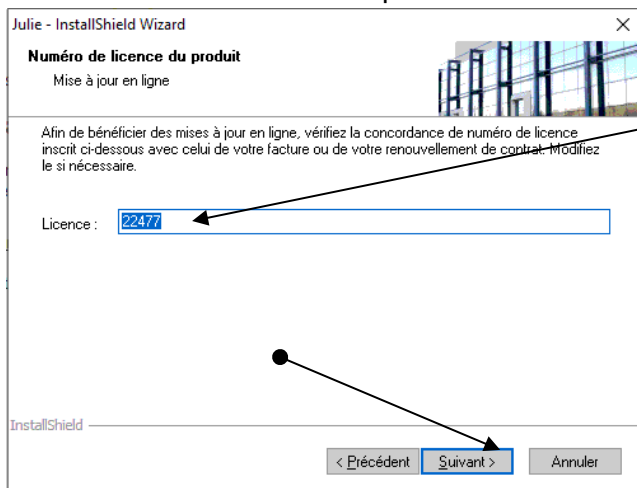

Julie - InstallShield Wizard


Numéro de licence du produit
Mise à jour en ligne

Afin de bénéficier des mises à jour en ligne, vérifiez la concordance de numéro de licence inscrit ci-dessous avec celui de votre facture ou de votre renouvellement de contrat. Modifiez le si nécessaire.

Licence : 22477

InstallShield

< Précédent [Suivant > Annuler

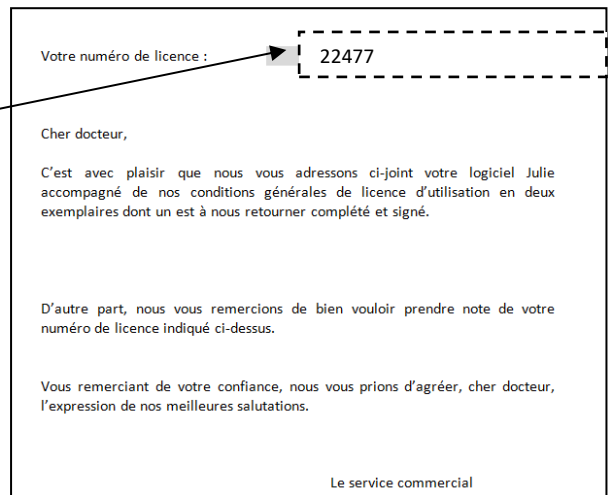

Votre numéro de licence : 22477

Cher docteur,


C'est avec plaisir que nous vous adressons ci-joint votre logiciel Julie accompagné de nos conditions générales de licence d'utilisation en deux exemplaires dont un est à nous retourner complété et signé.

D'autre part, nous vous remercions de bien vouloir prendre note de votre numéro de licence indiqué ci-dessus.


Vous remerciant de votre confiance, nous vous prions d'agréer, cher docteur, l'expression de nos meilleures salutations.

Le service commercial


- Lire les recommandations puis cliquez sur « Suivant »

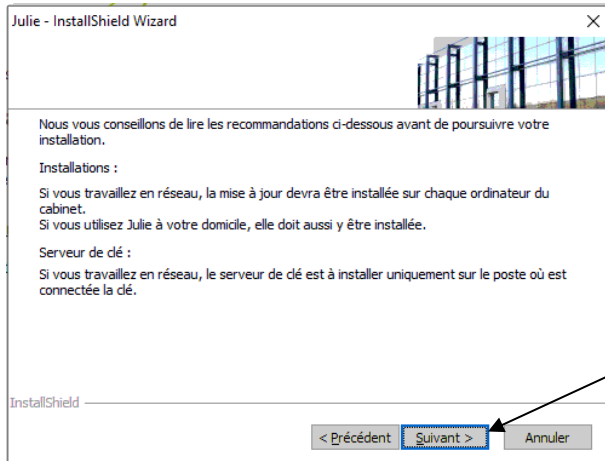


- Message d'information, cliquez sur « Oui »

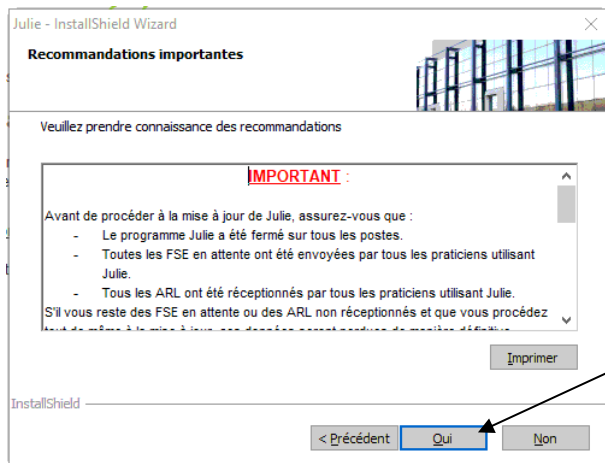

- Choix de l'emplacement dans le menu « Démarrer » de Windows




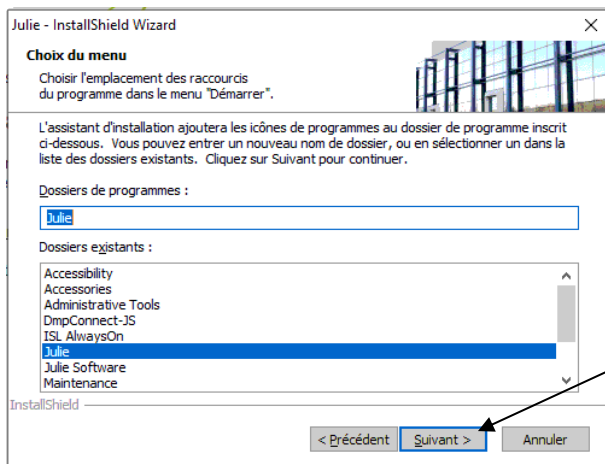


- Récapitulatif des choix de l'installation

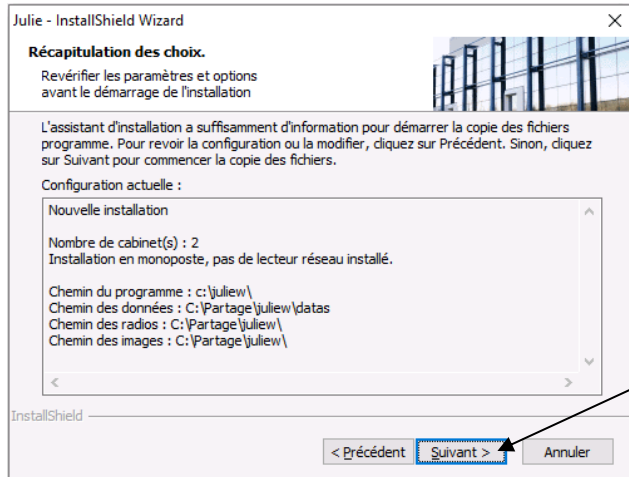


- Le processus d'installation du logiciel est maintenant lancé

Les divers étapes du processus d'installation vont se décliner et il faut patienter qu'il arrive à son terme.

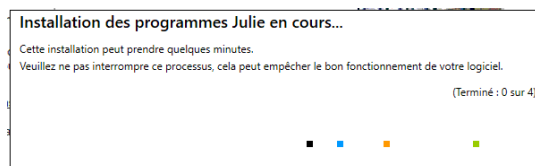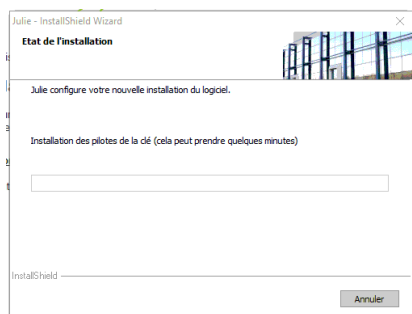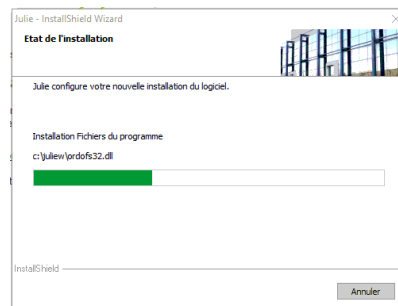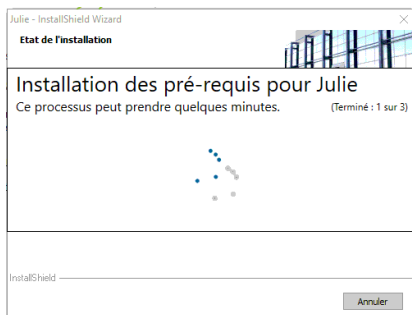

- Cliquez sur « Terminer »

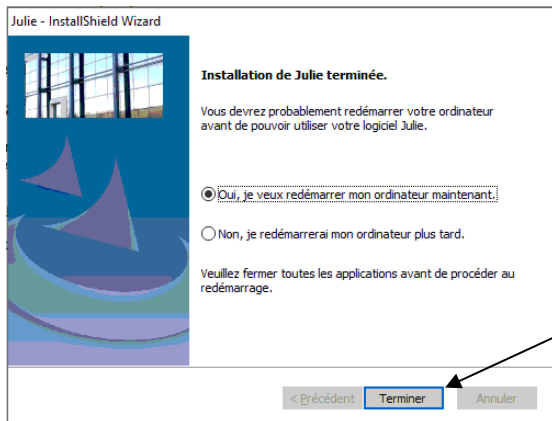


Le logiciel est maintenant installé et prêt à l'emploi.


4. Informations diverses :

4.1 Partage du dossier contenant les données JULIE.


Vous pouvez accéder à l'interface de partage de dossier Windows en effectuant un clic droit sur le répertoire « Partage » préalablement créé

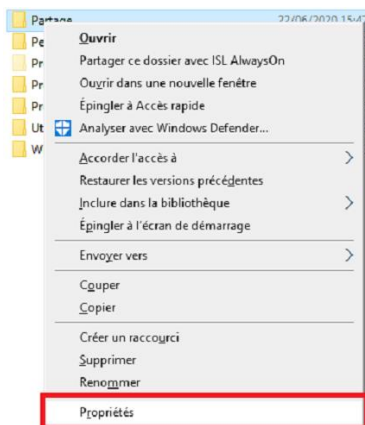

Puis, dans la nouvelle fenêtre, veuillez suivre les étapes suivantes :

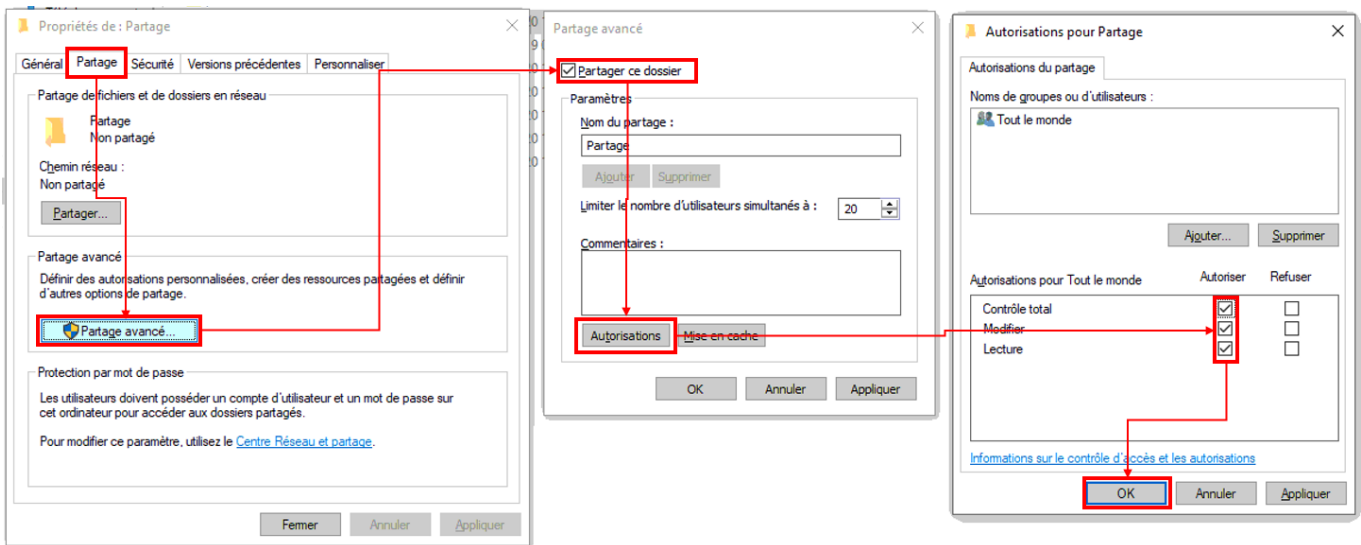

- Sélectionner l'onglet « Partage »
- Cliquez sur le bouton « Partage avancé »
- Cocher la case Partager ce dossier
- Cliquez sur le bouton « Autorisations »
- Cocher les cases d'autorisation pour « Contrôle total, Modifier et Lecture » et validez

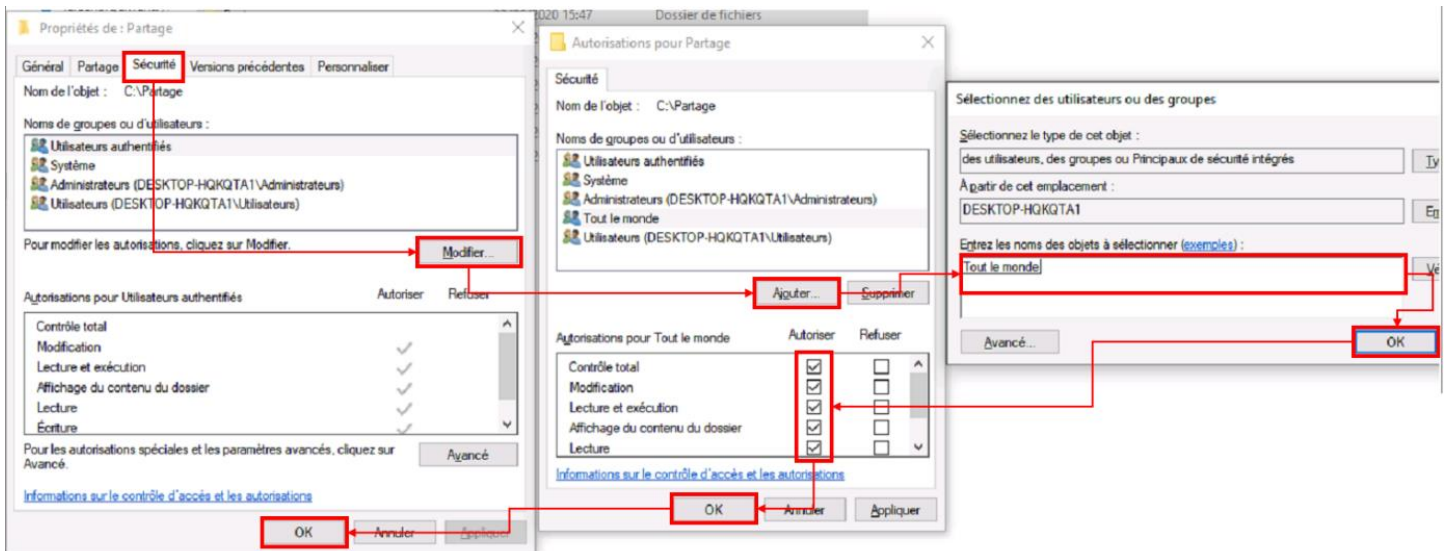

- Dans l'onglet « Sécurité »
- Cliquez sur le bouton « Modifier »
- Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur « Ajouter »

- Ajoutez l'utilisateur « Tout le monde » puis validez
- Cochez la case de contrôle total
- Valider le tout

4.2 Information relatif aux pare-feu et antivirus

Autoriser Julie.exe dans les règles entrantes et sortantes du pare-feu Windows.

Vérifier que le pare-feu et/ou antivirus ne bloque pas les fichiers d'installation JULIE.

Exclure de l'analyse antivirus :

- Juliew\Julie.exe
- Juliew\w32mkde.exe
- Juliew\pyxvital\pyxvital.exe
- Juliew\pyxvital\pyxrss.exe
- Juliew\pyxvital\pyxnet.exe
- C:\Juliew
- C:\partage\Juliew\pyxvital

4.3 Marquage CE

Le logiciel Julie Imaging est marqué CE depuis le mois d'Octobre 2015 par l'organisme notifié BSI, conformément à la Directive Européenne 93/42 CEE.

Référence de la notice : PR-Manuel-installserv-2006-01

Date de révision : 25/06/2020 version A

Année de marquage CE : Octobre 2015

Organisme notifié : BSI 2797

Fabricant : Julie Solutions ; 2 rue des vieilles vignes ; 77183 Croissy Beaubourg



L'équipe Julie Solutions vous souhaite une bonne installation !

Besoin d'une information complémentaire ?

N'hésitez pas à nous contacter :

Service client:
01.60.93.73.70 (Coût classique)
+ touche 1
support@julie.fr

Service commercial:
01.60.93.73.70 (Coût classique)
+ touche 2
commercial@julie.fr

Service formation :
01.60.93.73.70 (Coût classique)
+ touche 4
formation@julie.fr

Service administratif:
01.60.93.73.70 (Coût classique)
+ touche 3
adv@julie.fr

www.julie.fr

