



PROCÉDURE D'INSTALLATION JULIE MONOPOSTE

Distributeur / Client

Date dernière modification document : 20/05/2021

Réf : PR-Manuel-installmono-2006-01-B

Ce document technique détaillé vous permet de connaître, en fonction des installations, les différentes configurations possibles afin d'appréhender et adapter au mieux l'installation du logiciel Julie.

Bonne installation !

Table des matières

1.	Configuration matériel minimale requise:	2
2.	Procédure installation JULIE MONOPOSTE	2
2.1.	Prérequis :	2
2.2.	Etapas d'installation :	3
3.	Informations diverses	9
3.1.	Message d'information relatif aux pare-feu et antivirus	9
3.2.	Marquage CE	9
3.2.1	Module Julie Imaging.....	9
3.2.2	Module Julie Prescription	9

1. Configuration matériel minimale requise:

	Configuration Minimale
CPU	I5
Mémoire	4Go
Disque Dur	500Go
OS	Windows 10 (64 bits)

Version Word compatible en 32 bits seulement : 2003/2007/2010/2013/2016

Attention : Les installations ne répondant pas aux critères demandés ne pourront être pris en charge par le service technique JULIE en cas de problème.


2. Procédure installation JULIE MONOPOSTE

2.1. Prérequis :

- CDROM d'installation JULIE
- Lecteur CDROM
- Clé de protection du logiciel JULIE
- Un ordinateur installé selon la configuration requise.

2.2. Etapes d'installation :

- Insérez le CDrom dans le lecteur
- Cliquez sur « Exécuter autorun.EXE »

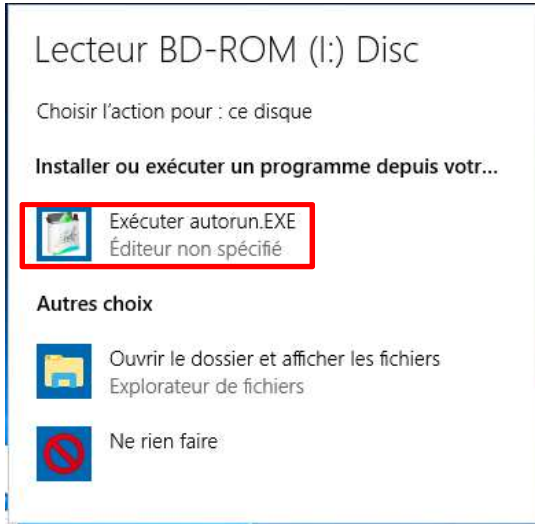

- Cliquez sur « Installations »




- Cliquez sur l'icône « JULIE »




- Cliquez sur « Suivant »




- Veuillez prendre connaissance et accepter le contrat de licence pour continuer

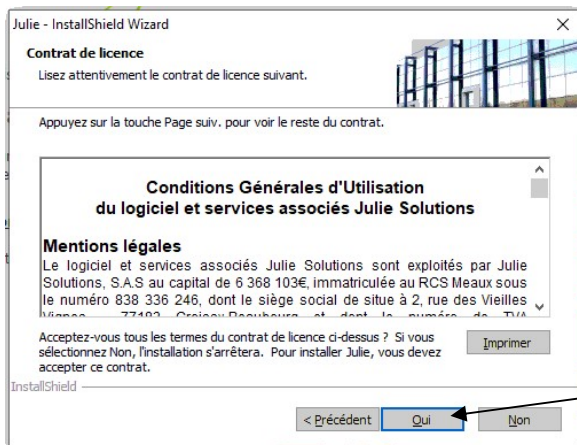



- Vérifiez le chemin du programme et des données et cliquez sur « Suivant »

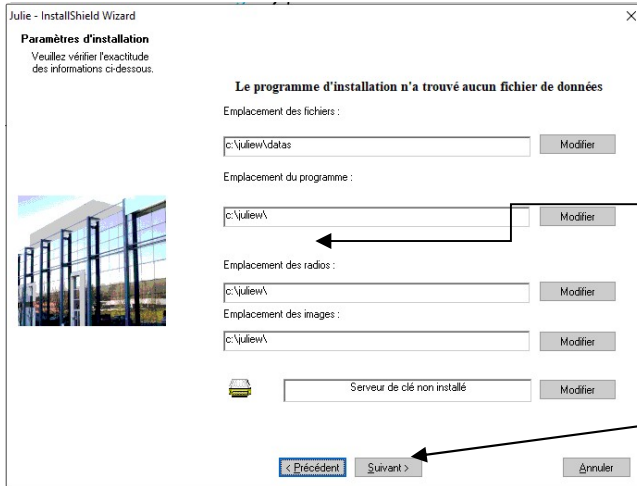


- Vérifiez les informations dans la fenêtre et cliquez sur suivant

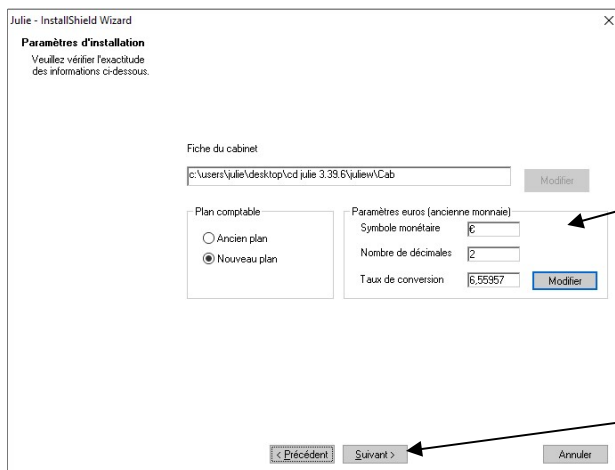


- Contrôlez que le numéro de licence corresponde bien à celui noté sur le feuillet joint à la commande et cliquez sur « Suivant »

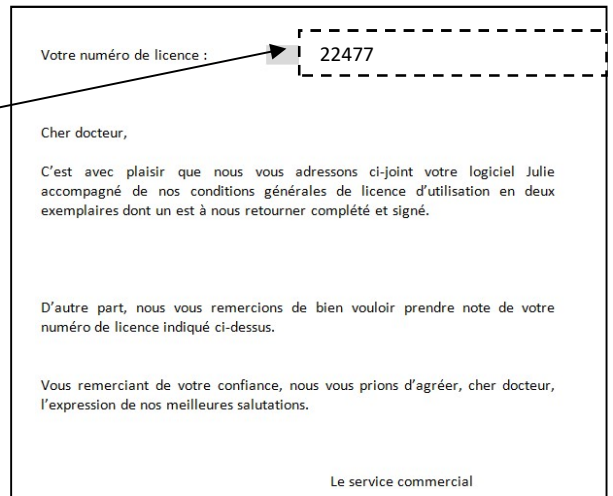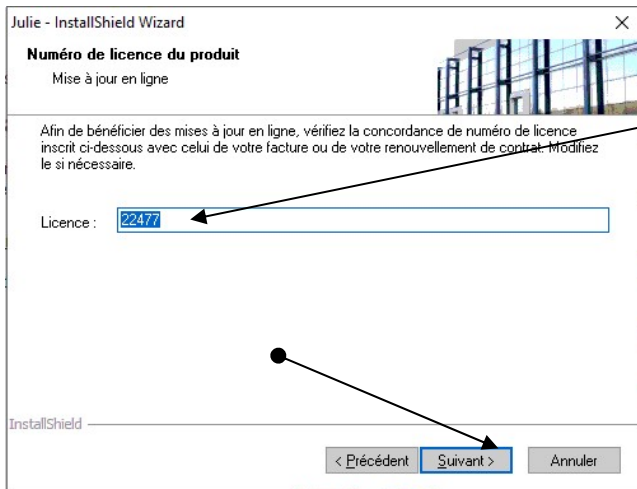


- Lire les recommandations puis cliquez sur « Suivant »

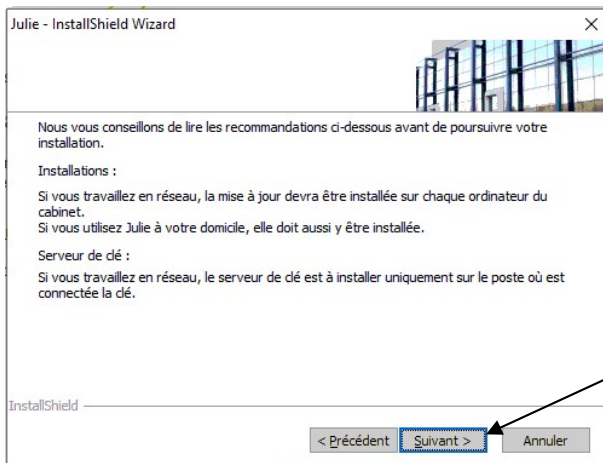


- Message d'information, cliquez sur « Oui »

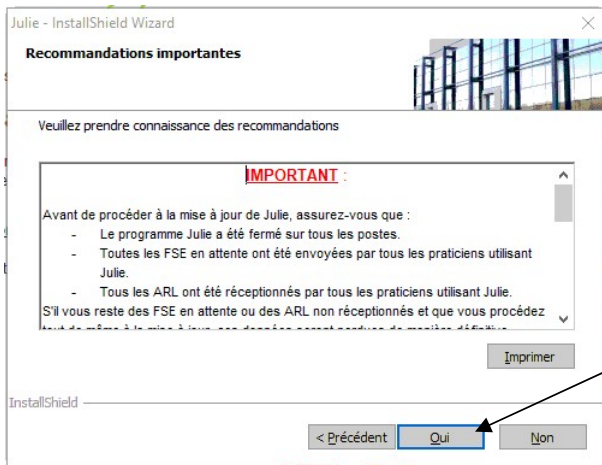

- Choix de l'emplacement dans le menu « Démarrer » de Windows




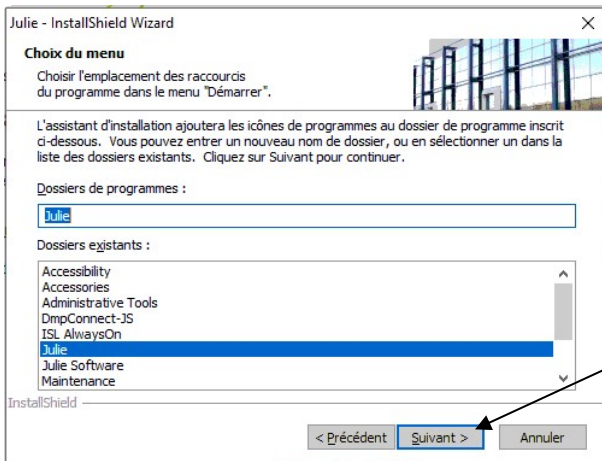


- Récapitulatif des choix de l'installation

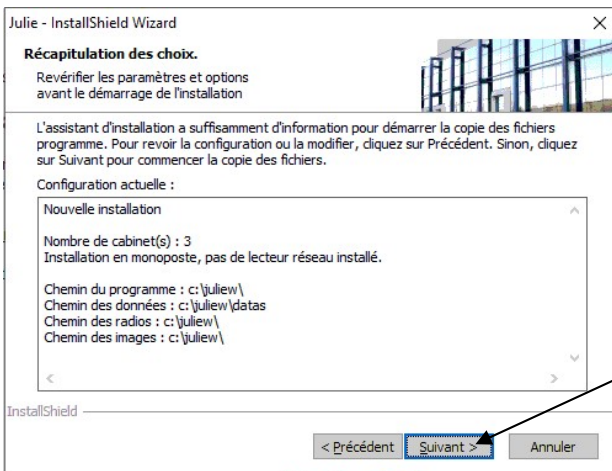


- Le processus d'installation du logiciel est maintenant lancé

Les divers étapes du processus d'installation vont se décliner et il faut patienter qu'il arrive à son terme.

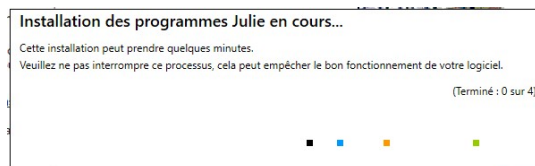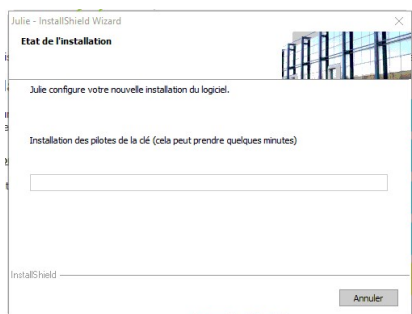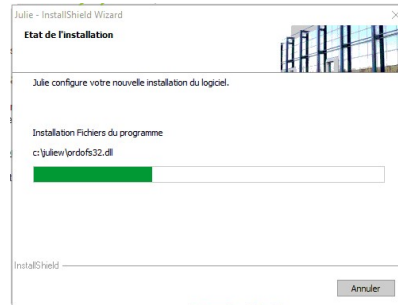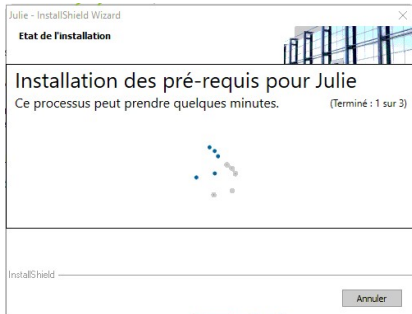

- Cliquez sur « Terminer »

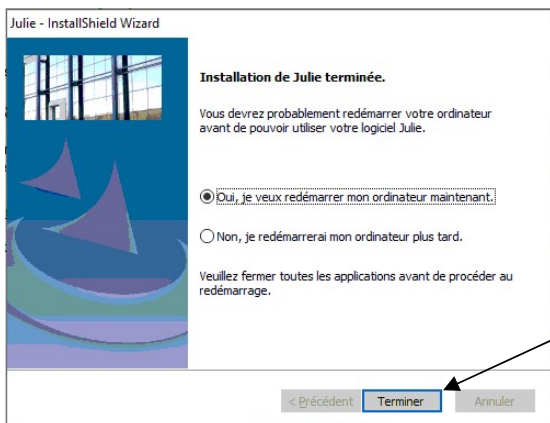

Le logiciel est maintenant installé et prêt à l'emploi.

3. Informations diverses

3.1. Message d'information relatif aux pare-feu et antivirus

Vérifier que le pare-feu et/ou antivirus ne bloque pas les fichiers d'installation JULIE.

Exclure de l'analyse antivirus :

- Juliew\Julie.exe
- Juliew\w32mkde.exe
- Juliew\pyxvital\pyxvital.exe
- Juliew\pyxvital\pyxrss.exe
- Juliew\pyxvital\pyxnet.exe
- C:\Juliew
- C:\Juliew\pyxvital

3.2. Marquage CE

3.2.1 Module Julie Imaging

Le logiciel Julie Imaging est marqué CE depuis le mois d'Octobre 2015 par l'organisme notifié BSI, conformément à la Directive Européenne 93/42 CEE.

Référence de la notice : PR-Manuel-installmono-2006-01

Date de révision : 20/05/2021 version B

Année de marquage CE : Octobre 2015

Organisme notifié : BSI 2797

Fabricant : Julie Solutions ; 2 rue des vieilles vignes ; 77183 Croissy Beaubourg

3.2.2 Module Julie Prescription

Le logiciel Julie Prescription est marqué CE depuis le mois de Mai 2021, conformément à la Directive Européenne 93/42 CEE.

Référence de la notice : PR-Manuel-installclient-2006-01

Date de révision : 20/05/2021 version B

Année de marquage CE : Mai 2021

Fabricant : Julie Solutions ; 2 rue des vieilles vignes ; 77183 Croissy Beaubourg

NB : Pour atteindre sa destination médical, le module Julie prescription doit être utilisé avec le logiciel VIDAL Sécurisation.



L'équipe Julie Solutions vous souhaite une bonne installation !

Besoin d'une information complémentaire ?

N'hésitez pas à nous contacter :

Service client:

01.60.93.73.70 (Coût classique)

+ touche 1

support@julie.fr

Service commercial:

01.60.93.73.70 (Coût classique)

+ touche 2

commercial@julie.fr

Service formation :

01.60.93.73.70 (Coût classique)

+ touche 4

formation@julie.fr

Service administratif:

01.60.93.73.70 (Coût classique)

+ touche 3

adv@julie.fr

www.julie.fr

