




Manuel d'utilisation de Julie Prescription



JULIE SOLUTIONS – 2, rue des Vieilles Vignes – 77183 CROISSY BEAUBOURG – France
Tél. : +33 (0)1 60 93 73 70 – Fax : +33 (0)1 60 93 73 71 – WWW.JULIE.FR

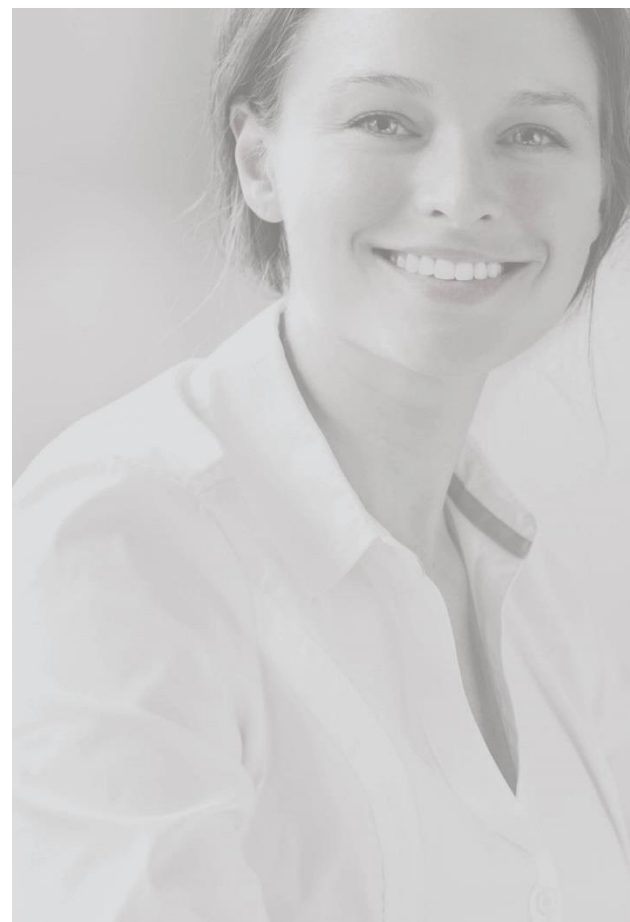

Description du dispositif

Le logiciel **Julie Prescription** est prévu pour fonctionner uniquement en étant intégré dans le logiciel de gestion de cabinet dentaire Julie, qui est également développé et commercialisé par la société Julie Solutions.

Le logiciel **Julie Prescription** ne peut atteindre son usage médical qu'à partir du moment où il est utilisé avec le logiciel **VIDAL Sécurisation**, seul logiciel utilisable avec **Julie Prescription**.

Le logiciel **Julie Prescription** est un logiciel de création d'ordonnances sécurisées composé de deux fonctionnalités **ANTECEDENT** et **ORDONNANCE**.

La fonctionnalité **ORDONNANCE** permet d'éditer des ordonnances en accord avec la réglementation qui impose de prescrire les médicaments en **Dénomination Commune Internationale (DCI)** et d'accéder à des options pour faciliter l'édition rapide d'ordonnances (ordonnance types, posologies personnalisées, etc.). Cette fonctionnalité se repose sur la fonctionnalité **ANTECEDENTS** qui permet à l'utilisateur de renseigner des informations concernant l'état physiopathologique du patient (sa taille, son poids, ses allergies, ses traitements, ses maladies, etc).

L'intérêt ici pour l'utilisateur est de bénéficier d'une aide à la prescription par le biais de contrôles automatiques entre les données saisies dans **ANTECEDENTS** et dans **ORDONNANCE** et ainsi d'être alerté, via le logiciel, en cas de risque pour le patient.

Le logiciel de gestion de cabinet dentaire Julie est installé sur les postes de travail informatiques standard fonctionnant sous le système d'exploitation Windows et peut-être manipulé avec le clavier et la souris.





Précaution d'emploi

L'installation du logiciel se fait à l'aide du CD-Rom fournit dans le coffret Julie Solutions. Une fois installé, le CD-Rom n'est plus nécessaire pour faire fonctionner le logiciel.

En revanche, la clé USB d'activation est indispensable pour l'utilisation du logiciel. Elle permet entre autres de donner accès à la gamme choisie (Julie Gestion, Julie Pro & Expert) et de débloquer, le cas échéant, l'accès à la fonctionnalité multipostes.



Le logiciel **Julie** n'est pas compatible avec les systèmes d'exploitation tels que Mac ou Linux ou les émulations Windows sur Mac et Linux.



Le logiciel **Julie Prescription** ne peut être utilisé qu'avec le logiciel **VIDAL Sécurisation**, il ne fonctionne pas en association avec un autre logiciel de base documentaire médicale.



Les alertes affichées par **Julie Prescription** en cas de risque pour le patient ne sont qu'une aide pour l'utilisateur. Le logiciel n'est pas destiné à se substituer à l'analyse du professionnel de santé.





Spécifications du produit

Afin de pouvoir utiliser le logiciel de gestion de cabinet dentaire Julie, il est impératif que le matériel informatique réponde à minima aux spécifications suivantes :

Systeme d'exploitation

Pour pouvoir utiliser le dispositif médical **Julie Prescription**, le logiciel doit être installé sur un ordinateur utilisant le système d'exploitation Windows suivant :

- Windows 10 (64 bits)

Les autres systèmes d'exploitation tels que Mac ou Linux ne sont pas pris en compte par le dispositif médical. Les émulations Windows sur Mac et Linux ne sont pas autorisées.

Hardware

Pour pouvoir fonctionner correctement et remplir ses performances essentielles, le dispositif médical doit être installé sur un ordinateur répondant à minima aux caractéristiques suivantes :

- Processeur I5 ou I7;
- RAM de 4 Go minimum ou plus ;
- Espace disque dur de 500 Go minimum ou plus ;
- Système de sauvegarde (CD-ROM, disque dur externe, stockage sur Internet, ...).





Durée de vie de votre logiciel

Le logiciel **Julie Prescription** vous offre une durée de vie minimale de 1 an. Ses performances sont maintenues pendant toute sa durée de vie.

Les performances de votre produit peuvent être rallongées d'autant si vous vous assurez que :

- Les mises à jour du système d'exploitation proposées par Microsoft sont régulièrement effectuées (minimum 1 fois par an).
- Les mises à jour du logiciel **Julie Prescription** sont régulièrement effectuées (minimum 1 fois par an).
- L'abonnement au logiciel **VIDAL Sécurisation** est réitéré.

Contrat de maintenance

Afin de rallonger et d'améliorer les performances de votre produit, Julie Solutions met en place un contrat de maintenance spécifique vous donnant accès à l'ensemble des évolutions.

Pour plus d'informations, contacter votre service technique au 01 60 93 73 73.





Marquage CE

Le logiciel **Julie Prescription** est marqué CE depuis le mois de mai 2021 conformément à la Directive Européenne 93/42 CEE.

Référence de la notice : JU-PR-2205-01-B

Date de révision : 09/05/2022






Année de marquage CE : mai 2021

Fabricant : Julie Solutions ; Le Coruscant ; 2 rue des vieilles vignes ; 77183 Croissy Beaubourg



JULIE SOLUTIONS – 2, rue des Vieilles Vignes – 77183 CROISSY BEAUBOURG – France
Tél. : +33 (0)1 60 93 73 70 – Fax : +33 (0)1 60 93 73 71 – WWW.JULIE.FR

Guide des pictogrammes

Symbole	Description
	Nom et adresse du Fabricant
	Référence du dispositif médical
	Date de fabrication
	Conformité aux exigences des directives européennes applicables.
	Consulter les instructions d'utilisation électroniques

Pour toutes questions, contacter votre service technique au 01 60 93 73 73. (Prix d'un appel local)




SOMMAIRE

I. ACCES AU CABINET PROTEGE PAR MOT DE PASSE	9
II. UTILISATION DU MODULE ORDONNANCE AVEC LE VIDAL	10
A. ETAT PHYSIOPATHOLOGIQUE DU PATIENT	10
B. INTOLERANCES (CONTRE-INDICATIONS) DU PATIENT	13
1. <i>Ajouter une intolérance liée à une contre-indication d'un médicament</i>	13
2. <i>Retirer une intolérance du patient</i>	17
C. TRAITEMENT DU PATIENT	18
1. <i>Ajouter un traitement (médicament)</i>	18
2. <i>Renseigner les informations du traitement</i>	20
D. MODULE « ORDONNANCES »	22
1. <i>Description</i>	22
2. <i>Rédiger une ordonnance</i>	24
3. <i>Rédiger une ordonnance en DC (Domination Commune)</i>	27
4. <i>Imprimer une ordonnance</i>	33
5. <i>Comment insérer l'âge du patient et le nombre de médicaments prescrits sur les ordonnances</i>	36
6. <i>Renouveler une ordonnance</i>	38
7. <i>Renouveler un traitement</i>	39
8. <i>Rechercher les traitements d'un patient</i>	40
9. <i>Rechercher les patients prenant un traitement</i>	41
10. <i>Pharmacovigilance</i>	42
G. REMARQUES	42



I. Accès au cabinet protégé par mot de passe

- Le code praticien défini dans le menu « **Utilitaires /Fiche du cabinet / Onglet « Codes confidentiels »** » permet de protéger l'accès au cabinet en cochant la case « **A demander au démarrage** ». Ce mot de passe sera demandé à chaque ouverture du cabinet.
 - Par exemple, le cabinet 1 a défini un mot de passe,
 - Lorsque l'utilisateur clique sur le cabinet 1 alors qu'il est sur un autre cabinet,
 - Affichage de la fenêtre ci-dessous permettant la saisie du mot de passe :

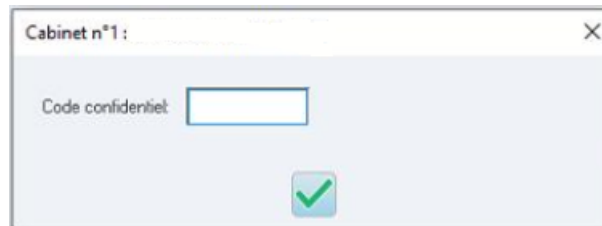

- Si le mot de passe n'est pas renseigné, il est impossible d'accéder au cabinet.



II. Utilisation du module Ordonnance avec le Vidal


La fenêtre Etat physiopathologique n'est disponible que si le logiciel **VIDAL Sécurisation** est installé sur le poste de l'utilisateur.

A. Etat physiopathologique du patient

Avant de commencer une prescription, il est important de renseigner l'état physiopathologique du patient car cela permet d'afficher des contrôles de sécurité **VIDAL Sécurisation** sur la prescription. Sur la fiche patient :

- Cliquez sur le bouton « **Antécédents** »,
- Dans le menu, sélectionnez « **Etat physiopathologique** »
- Ouverture de la fenêtre ci-dessous :



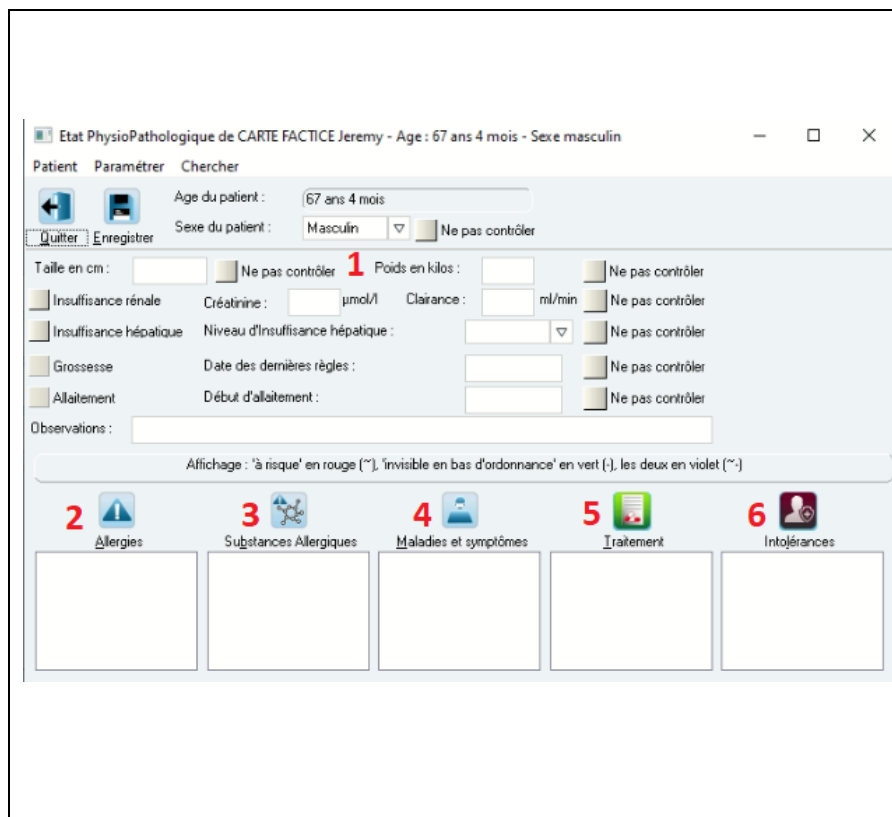

a) Information sur l'état physiopathologique

- Renseignez la taille et le poids qui sont nécessaires pour enregistrer l'état physiopathologique du patient
 - Pour signaler un critère à contrôler, cochez la case correspondant au critère et saisissez la valeur du critère (par exemple, insuffisance rénale, grossesse)
 - Si vous ne connaissez pas la valeur d'un critère ou qu'il est inutile de le contrôler, cochez la case à droite du critère. « **Ne pas contrôler** ». Néanmoins, pour que les contrôles de sécurité du logiciel **VIDAL Sécurisation** soient complets, il faut que ces informations soient renseignées.

b) Maladie, allergie du patient

Lorsque le patient présente une hypersensibilité, une intolérance à une substance ou une maladie, renseignez les points 2, 3, 4 :

- Cliquez sur le bouton « **Allergies** » pour renseigner les allergies du patient :
 - Cliquez ensuite sur le bouton « **Ajouter** » pour chercher une allergie par son nom dans le Vidal et l'ajouter au patient.
- Cliquez sur le bouton « **Substances allergiques** » pour renseigner les substances auxquelles le patient est allergique :

- Cliquez sur le bouton « **Ajouter** » pour chercher une substance allergique par son nom dans le Vidal et l'ajouter au patient.

4. Cliquez sur « **Maladies et symptômes** » pour renseigner les maladies et symptômes du patient:

- Cliquez sur le bouton « **Ajouter** » pour chercher une maladie ou un symptôme (CIM10) dans le Vidal et l'ajouter au patient.

c) Traitement du patient

5. Cliquez sur « **Traitement** » pour renseigner les médicaments pris par le patient :

- Cliquez sur le bouton « **Ajouter** » pour chercher un médicament dans le Vidal et l'ajouter au patient.

Se reporter [au chapitre C](#) pour plus de détails.

6. Cliquez sur « **Intolérances** » Pour ajouter une intolérance au patient :

- Cliquez sur le bouton « **Ajouter** » pour chercher une contre-indication dans le Vidal et l'ajouter au patient.

Se reporter [au chapitre B](#) pour plus de détails.




B. Intolérances (contre-indications) du patient

La liste des intolérances est importée à partir de la base médicamenteuse Vidal.

1. Ajouter une intolérance liée à une contre-indication d'un médicament

- Pour ajouter une intolérance, cliquez sur le bouton « **Intolérances** » de la fiche patient.
La fenêtre des intolérances est divisée en deux parties :



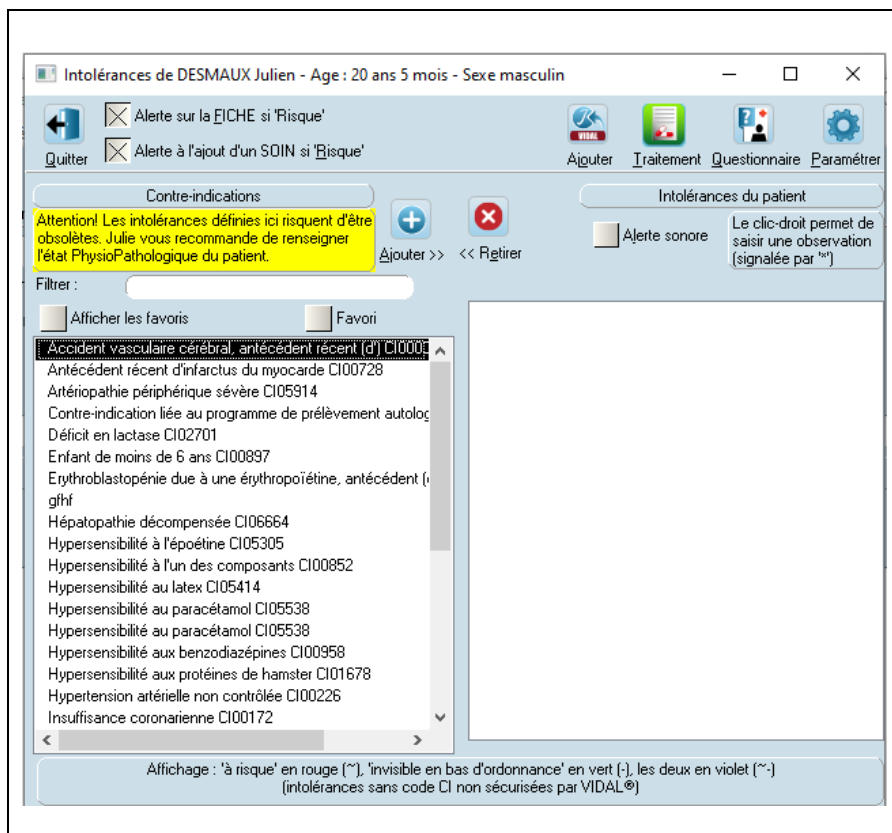

Intolérances de DESMAUX Julien - Age : 20 ans 5 mois - Sexe masculin

Alerte sur la [E]ICHE si 'Risque'

Alerte à l'ajout d'un SOIN si 'Risque'

Contre-indications

Attention! Les intolérances définies ici risquent d'être obsolètes. Julie vous recommande de renseigner l'état PhysioPathologique du patient.

Intolérances du patient

Alerte sonore

Le clic-droit permet de saisir une observation (signalée par **)

Accident vasculaire cérébral, antécédent récent (d) CI0001

Antécédent récent d'infarctus du myocarde CI00728

Artériopathie périphérique sévère CI05914

Contre-indication liée au programme de prélèvement autolog

Déficit en lactase CI02701

Enfant de moins de 6 ans CI00897

Erythroblastopénie due à une érythropoïétine, antécédent (g) gHf

Hépatopathie décompensée CI06664

Hypersensibilité à l'époétine CI05305

Hypersensibilité à l'un des composants CI00852

Hypersensibilité au latex CI05414

Hypersensibilité au paracétamol CI05538

Hypersensibilité au paracétamol CI05538

Hypersensibilité aux benzodiazépines CI00958

Hypersensibilité aux protéines de hamster CI01678


Hypertension artérielle non contrôlée CI00226

Insuffisance coronarienne CI00172


Affichage : 'à risque' en rouge (*), 'invisible en bas d'ordonnance' en vert (-), les deux en violet (**)
(intolérances sans code CI non sécurisées par VIDAL®)

- La partie de gauche affiche la liste des intolérances paramétrées
- La partie de droite affiche les intolérances associées au patient.

- Cliquez ensuite sur le bouton « **Ajouter** »
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisir le libellé de l'intolérance à ajouter

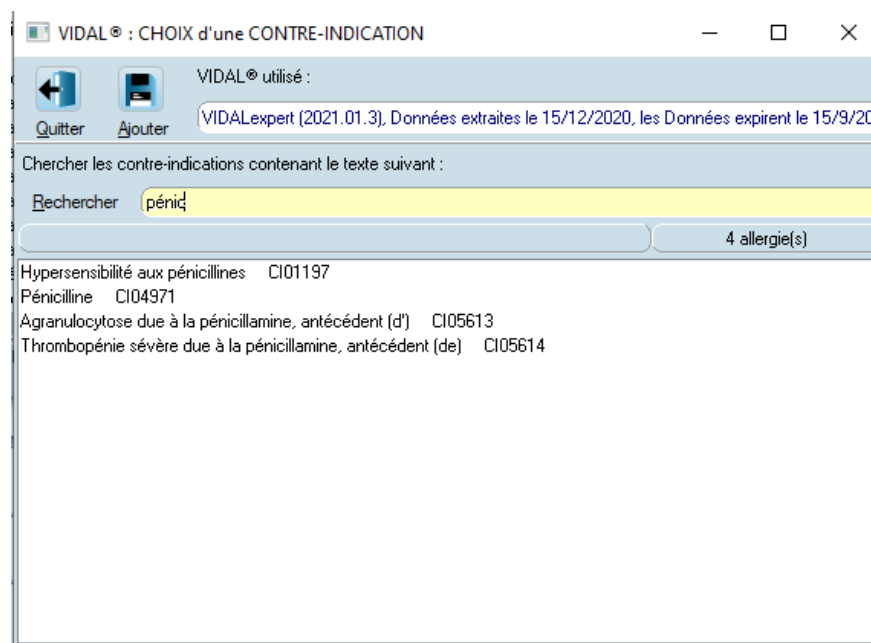


- Sélectionnez dans la liste l'intolérance à ajouter au patient puis cliquer sur le bouton « **Ajouter** », celle-ci est automatiquement associée au patient.

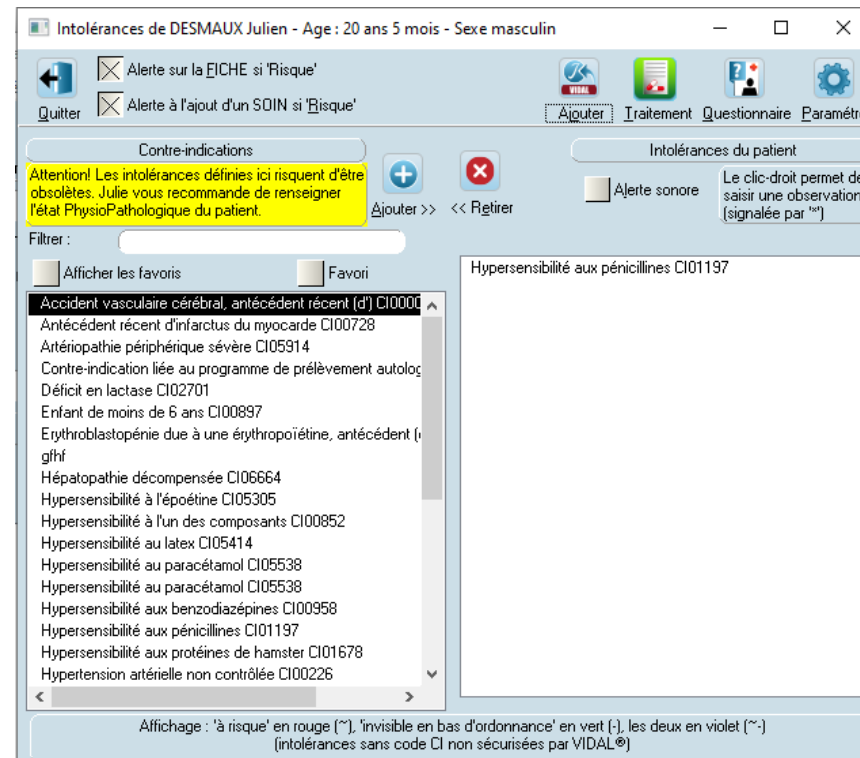

2. Retirer une intolérance du patient

- Pour retirer une intolérance, cliquez sur le bouton « **Intolérance** » de la fiche patient.
- Dans la partie droite de la fenêtre des intolérances, sélectionnez l'intolérance et cliquez sur le bouton « Retirer » ou double-cliquez sur l'intolérance à retirer.

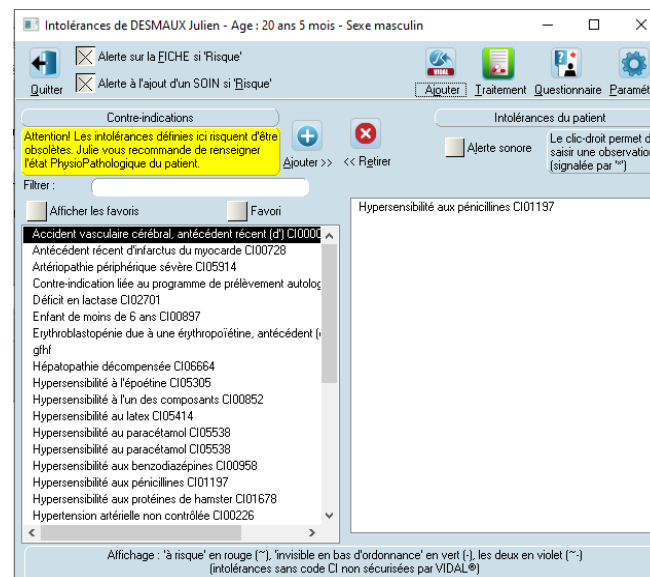



C. Traitement du patient

La liste des traitements est importée à partir de la base médicamenteuse Vidal.

1. Ajouter un traitement (médicament)

Ce module permet la saisie de tous les traitements médicamenteux en cours pour le patient y compris ceux qui n'ont pas été prescrits par le praticien.

- Pour ajouter un médicament pris par le patient, cliquez sur le bouton « **Ordonnance** » de la fiche patient.
- Cliquez ensuite sur le bouton « **Traitement** »



- Cette fenêtre est divisée en deux parties :

- La partie de gauche affiche la liste des médicaments paramétrés
- Si le médicament n'existe pas, vous pouvez effectuer une recherche Vidal en cliquant sur le bouton « **Ajouter** » et rechercher selon vos critères de recherche un médicament, le sélectionner et cliquez sur le bouton « **Enregistrer** », celui-ci est automatiquement associé au patient.
- La partie de droite affiche les différents médicaments pris par le patient à l'extérieur du cabinet (affichés en rouge dans la liste) ou prescrits par un des praticiens du cabinet.

(Il est également possible d'accéder à cette fenêtre à partir des Intolérances ou de l'état physiopathologique du patient)

Age : 62 ans - Sexe féminin

en cours

prescrits par :

Extérieur

Il est possible de filtrer les traitements du patient au choix pour :

- Visualiser les traitements en cours
- Visualiser les traitements prescrits dans différents cabinets ou à l'extérieur.

2. Renseigner les informations du traitement


Il est possible de renseigner les informations suivantes pour le traitement :

- Sélectionnez dans la partie droite de l'écran le médicament à renseigner puis indiquer la durée du traitement :



The screenshot shows a software interface for entering treatment information. It includes a close button (X), a back button (Retirer), an 'Enregistrer' (Save) button, and a 'Répéter' (Repeat) button. Below these, there is a date field 'Du' with the value '00/00/0000', followed by 'au' and an empty date field. To the right of the date fields are two checkboxes: 'Au long cours' (checked) and 'ALD'. Below the date fields, the text 'Posologie : Assistant' is visible next to a small icon.

- Si le traitement n'a pas de date de fin, cocher la case « **Au long cours** »

-  Si la date de fin est arrivée à terme échu par rapport à la date de prescription d'un médicament, aucune analyse ne sera effectuée sur le traitement du patient.



- Saisir la posologie par le bouton « **Posologie** »
- Saisir le motif du traitement
- Sélectionner le cabinet qui a prescrit ce traitement, le cabinet « **extérieur** » est sélectionné par défaut à l'ajout du traitement (surligné en rouge dans la liste).
- Cliquez sur « **enregistrer** » pour modifier ces informations sur le traitement sélectionné dans la liste de gauche.

Décocher la case « **Ajouter du Vidal dans l'ordonnancier de Julie** » si vous ne souhaitez pas ajouter ce médicament à la liste des médicaments paramétrés pour la prescription

Le bouton « **Imprimer/exporter** » permet d'imprimer la liste des traitements du patient, selon les critères choisis en haut de la fenêtre (Traitements en cours et choix du cabinet prescripteur). L'exportation est possible en format Texte ou CSV.






D. Module « Ordonnances »

1. Description

- Pour accéder au module « Ordonnances », cliquer sur le bouton « **Ordonnance** » de la fiche patient.
- Ouverture de la fenêtre ci-dessous :



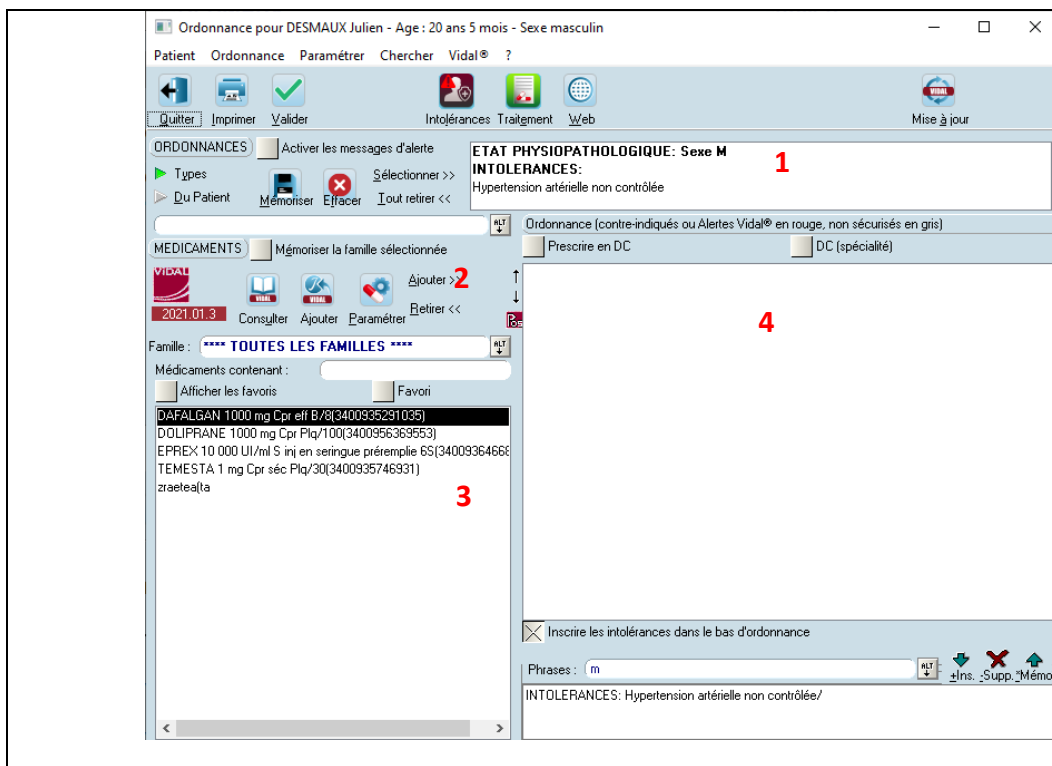

Ordonnance pour DESMAUX Julien - Age : 20 ans 5 mois - Sexe masculin

Patient Ordonnance Paramétrer Chercher Vidal ?

Quitter Imprimer Valider Intolérances Traitement Web Mise à jour

ACTIVER LES MESSAGES D'ALERTE

Types Du Patient Mémoiser Effacer Tout retirer <<

ORDONNANCES

ETAT PHYSIOPATHOLOGIQUE: Sexe M

INTOLERANCES:

Hypertension artérielle non contrôlée

Ordonnance (contre-indiqués ou Alertes Vidal® en rouge, non sécurisés en gris)

MEDICAMENTS

Mémoriser la famille sélectionnée

Prescrire en DC DC (spécialité)

VIDAL 2021.01.3 Consulter Ajouter Paramétrer Retirer <<

Famille: **** TOUTES LES FAMILLES ****

Médicaments contenant:

Afficher les favoris Favori

D'AFALGAN 1000 mg Cpr eff B(3400935291035)

DOLIPRANE 1000 mg Cpr Plq/100(3400956369553)

EPREX 10 000 UI/ml S inj en seringue préremplie 6S(34009364666)

TEMESTA 1 mg Cpr séc Plq/30(3400935746931)

zraetea(ta)

Inscrire les intolérances dans le bas d'ordonnance

Phrases: m

INTOLERANCES: Hypertension artérielle non contrôlée/

1. **La zone 1** affiche l'état physiopathologique et les intolérances du patient. Celles-ci sont également affichées dans le bas de l'ordonnance et imprimées sur l'ordonnance si la case Inscrire les intolérances dans le bas d'ordonnance est cochée.
2. **La zone 2** affiche les boutons :
 - « Consulter » : permet l'accès aux fonds documentaires du médicament sélectionné
 - « Ajouter » permet d'ajouter un médicament dans la liste paramétrée
 - « Paramétrer » permet notamment de définir les posologies à associer au médicament sélectionné
3. **La zone 3** affiche la liste des médicaments paramétrés dans la famille sélectionnée.
4. **La zone 4** affiche le contenu de l'ordonnance




2. Rédiger une ordonnance


Pour rédiger une ordonnance sécurisée, il est nécessaire de renseigner l'état physiopathologique du patient.

- Si le médicament recherché n'existe pas dans la liste des médicaments paramétrés, cliquez sur le bouton « **Ajouter** »
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisissez le médicament recherché



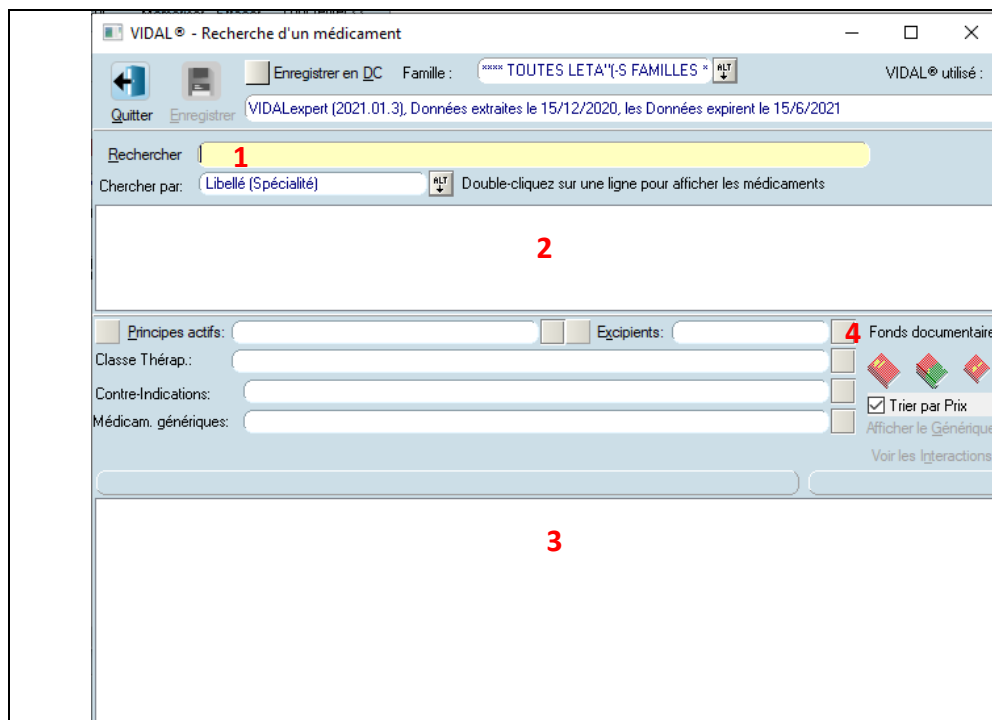

1. Sélectionner un critère de recherche dans la zone « Chercher par »

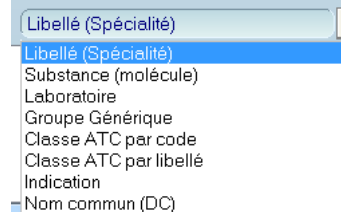


Saisir dans la **zone 1** le nom du médicament recherché puis appuyer sur la touche « **Entrée** » du clavier

2. La liste des spécialités apparaît alors dans la **zone 2**

3. En double-cliquant sur une spécialité, affichage des présentations disponibles dans la **zone 3**


4. Un nouveau « fond documentaire » est disponible : SMR/ASMR

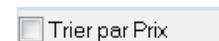


Par défaut, les médicaments sont classés par ordre alphabétique, si vous cochez cette case, la liste de la **zone 3** s'affiche en prix UCD

5. Sélectionner la présentation à ajouter dans l'ordonnance du patient puis cliquer sur le bouton « **Enregistrer** ».

Le médicament est aussitôt ajouté dans l'ordonnance en cours.

Une fois le médicament enregistré, renseigner la posologie en cliquant sur le bouton rouge « POS »  situé à gauche du contenu de l'ordonnance (zone 4 dans capture d'écran page 23).

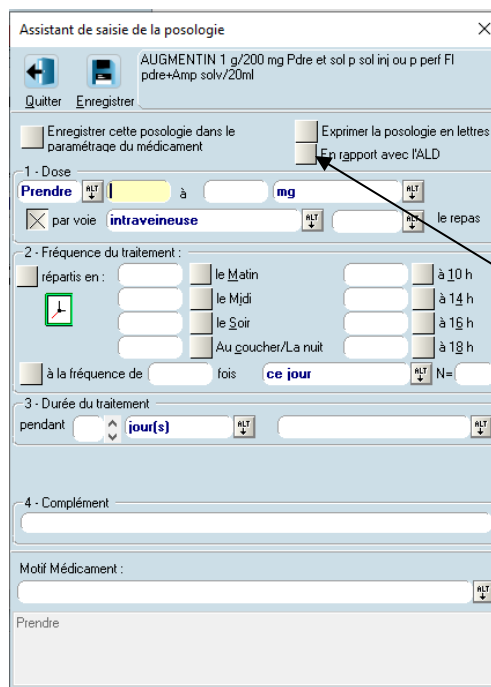

En cochant cette option, vous indiquez que le médicament prescrit est en rapport avec l'ALD du patient.

La case « **bizone** » sera donc cochée automatiquement lors de l'impression


3. Rédiger une ordonnance en DC (Domination Commune)

La dénomination commune d'une substance active pharmacologique est un nom non commercial défini par l'OMS.

Par exemple : Paracétamol, 500mg, gélule, voie orale.

Julie offre 3 possibilités :

- Dans la fenêtre de recherche de médicaments Vidal :
 - Chercher directement via le menu déroulant par dénomination Commune en sélectionnant « Nom Commun (DC) »

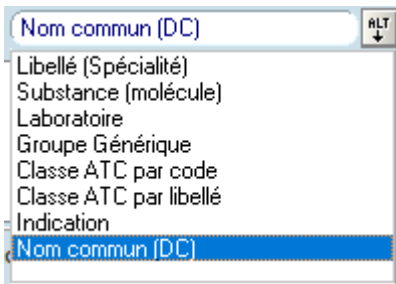

- Chercher par spécialité et cliquer sur le bouton « Prescrire en DC »:



C'est alors le Nom Commun qui sera enregistré dans la liste des médicaments.

- Dans la fenêtre de l'Ordonnance :
 - Coche la case « Prescrire en DC » afin de convertir toute votre ordonnance en DC.

<input checked="" type="checkbox"/> Prescrire en DC	<input type="checkbox"/> DC (spécialité)
---	--



Il existe des médicaments qu'il n'est pas possible de prescrire en DC:

- Les médicaments contenant plus de 3 substances actives (cas du MOXYDAR ou encore le DOLIRHUME), car le produit contient trop de substances pour que son libellé soit lisible.
- Les médicaments des produits biologiques et autres produits très particuliers (bio similaires...), car l'action de médicament dépend généralement de la formulation. Par exemple, pour les insulines, bien que la DC soit la même, il existe des insulines lentes et des insulines rapides.




Lors de la rédaction d'une ordonnance, Vidal affiche des alertes si :

Le médicament est contre indiqué pour le patient en fonction de ses contre-indications et de son état physiopathologique. L'utilisateur doit alors confirmer ou non la prescription du



médicament. Le bouton **ALERTES** apparait au-dessus de l'ordonnance et affiche une fenêtre contenant la liste de toutes les alertes trouvées. (Le médicament apparait en rouge s'il est contre indiqué pour le patient)

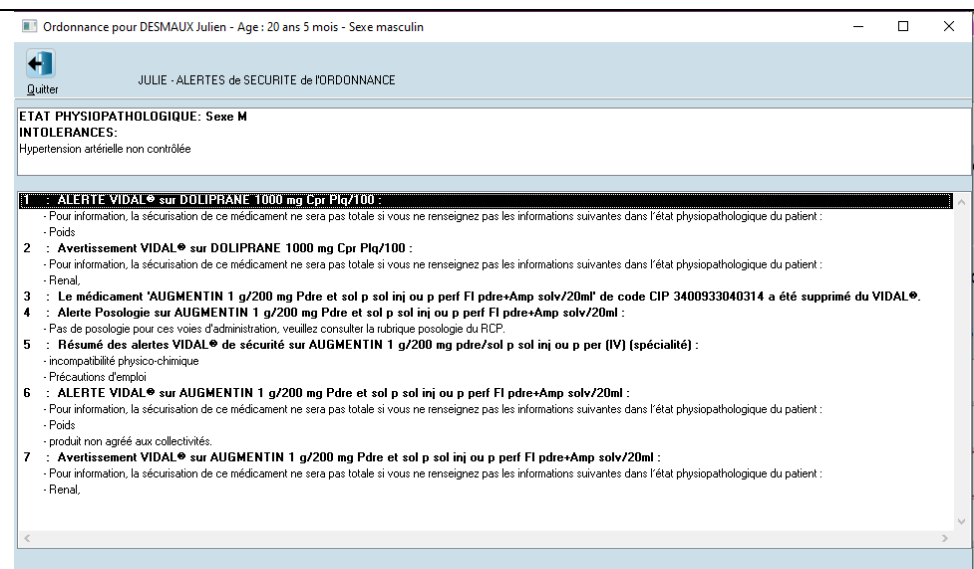

Ordonnance pour DESMAUX Julien - Age : 20 ans 5 mois - Sexe masculin

Quitter JULIE - ALERTES de SECURITE de l'ORDONNANCE


ETAT PHYSIOPATHOLOGIQUE: Sexe M
INTOLERANCES:
Hypertension artérielle non contrôlée

- 1 : **ALERTE VIDAL® sur DOLIPRANE 1000 mg Cpr Plq/100 :**
- Pour information, la sécurisation de ce médicament ne sera pas totale si vous ne renseignez pas les informations suivantes dans l'état physiopathologique du patient :
- Poids
- 2 : **Avertissement VIDAL® sur DOLIPRANE 1000 mg Cpr Plq/100 :**
- Pour information, la sécurisation de ce médicament ne sera pas totale si vous ne renseignez pas les informations suivantes dans l'état physiopathologique du patient :
- Renal,
- 3 : **Le médicament 'AUGMENTIN 1 g/200 mg Pdre et sol p sol inj ou p perf FI pdre+Amp solv/20ml' de code CIP 3400933040314 a été supprimé du VIDAL®.**
- 4 : **Alerte Posologie sur AUGMENTIN 1 g/200 mg Pdre et sol p sol inj ou p perf FI pdre+Amp solv/20ml :**
- Pas de posologie pour ces voies d'administration, veuillez consulter la rubrique posologie du RCP.
- 5 : **Résumé des alertes VIDAL® de sécurité sur AUGMENTIN 1 g/200 mg pdre/sol p sol inj ou p per (IV) (spécialité) :**
- incompatibilité physico-chimique
- Précautions d'emploi
- 6 : **ALERTE VIDAL® sur AUGMENTIN 1 g/200 mg Pdre et sol p sol inj ou p perf FI pdre+Amp solv/20ml :**
- Pour information, la sécurisation de ce médicament ne sera pas totale si vous ne renseignez pas les informations suivantes dans l'état physiopathologique du patient :
- Poids
- produit non agréé aux collectivités.
- 7 : **Avertissement VIDAL® sur AUGMENTIN 1 g/200 mg Pdre et sol p sol inj ou p perf FI pdre+Amp solv/20ml :**
- Pour information, la sécurisation de ce médicament ne sera pas totale si vous ne renseignez pas les informations suivantes dans l'état physiopathologique du patient :
- Renal,

- il existe des **interactions** entre médicaments prescrits ou entre le traitement du patient et les médicaments prescrits.
- Le bouton « interactions » apparait au-dessus de l'ordonnance



- te ETAT PHYSIOPATHOLOGIQUE: Sexe M
- et affiche une fenêtre contenant la liste de toutes les interactions trouvées.

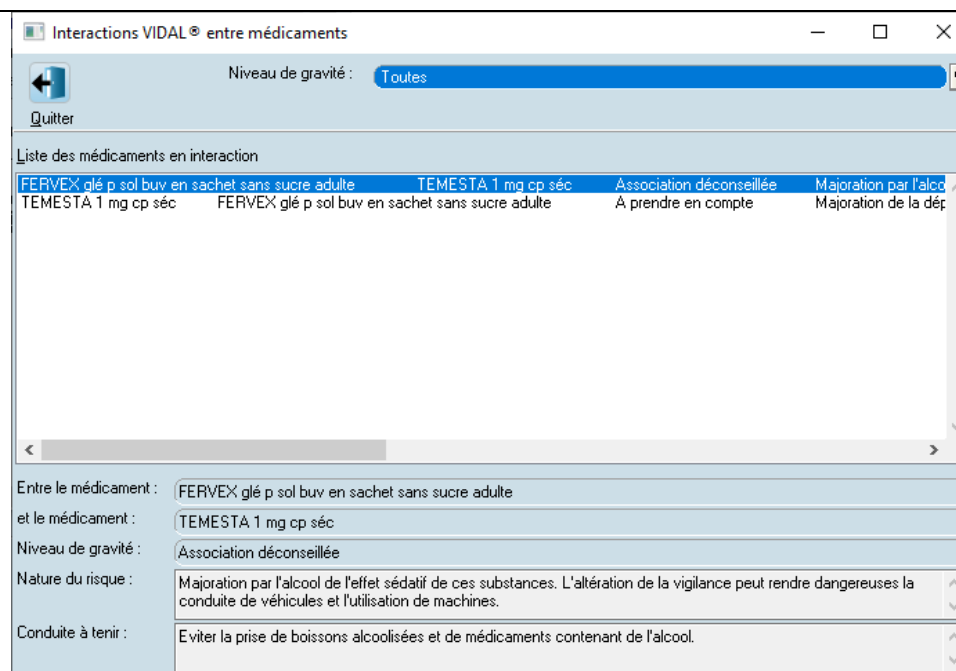

Interactions VIDAL® entre médicaments

Niveau de gravité : Toutes

Quitter

Liste des médicaments en interaction

FERVEX glé p sol buv en sachet sans sucre adulte	TEMESTA 1 mg cp séc	Association déconseillée	Majoration par l'alcool
TEMESTA 1 mg cp séc	FERVEX glé p sol buv en sachet sans sucre adulte	A prendre en compte	Majoration de la dép



Entre le médicament : FERVEX glé p sol buv en sachet sans sucre adulte

et le médicament : TEMESTA 1 mg cp séc


Niveau de gravité : Association déconseillée

Nature du risque : Majoration par l'alcool de l'effet sédatif de ces substances. L'altération de la vigilance peut rendre dangereuses la conduite de véhicules et l'utilisation de machines.


Conduite à tenir : Eviter la prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool.
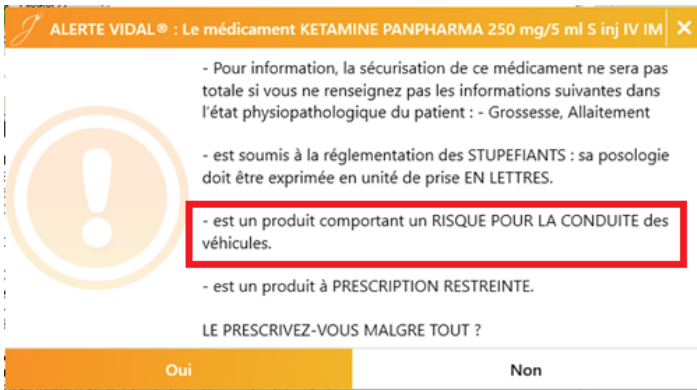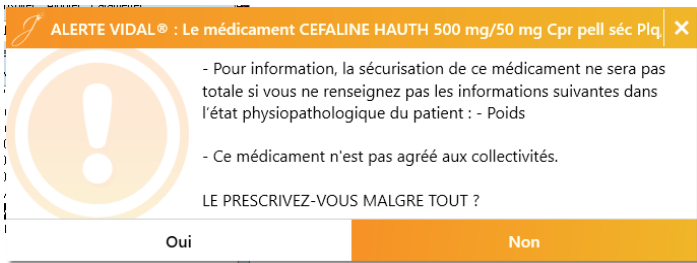
<p>- le médicament prescrit comporte des risques pour le patient (ex : risque pour la conduite des véhicules).</p>	
<p>- le médicament a un caractère dopant</p>	

- Si vous le désirez, vous pouvez désactiver ces alertes en décochant la case « Activer les messages d’alerte » ;

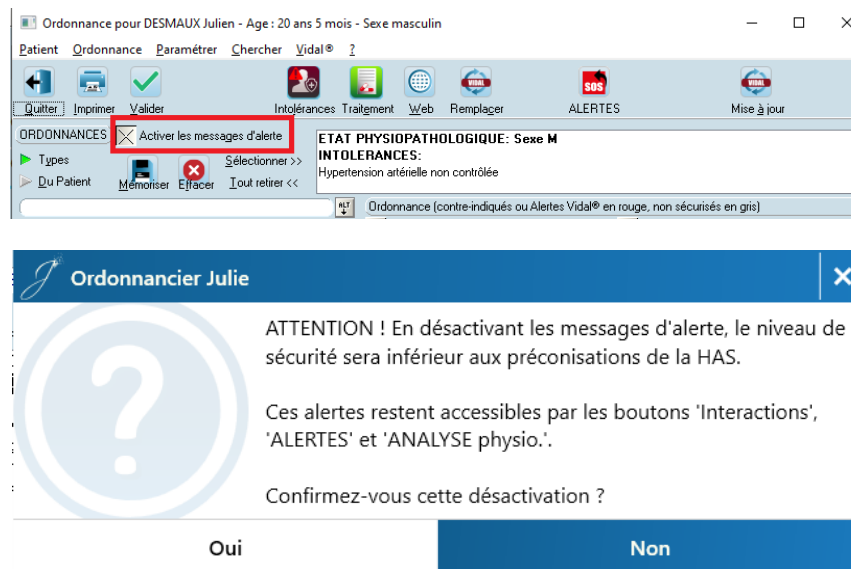


The screenshot shows a software window titled 'Ordonnance pour DESMAUX Julien - Age : 20 ans 5 mois - Sexe masculin'. The 'ORDONNANCES' section has a checkbox labeled 'Activer les messages d'alerte' which is currently checked. Below this, there is a confirmation dialog box titled 'Ordonnancier Julie' with a question mark icon. The dialog contains the following text: 'ATTENTION ! En désactivant les messages d'alerte, le niveau de sécurité sera inférieur aux préconisations de la HAS. Ces alertes restent accessibles par les boutons 'Interactions', 'ALERTES' et 'ANALYSE physio.'. Confirmez-vous cette désactivation ?'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Oui' and 'Non'.

- Vous pourrez néanmoins les consulter en cliquant sur le bouton  .


4. Imprimer une ordonnance

- Une fois la rédaction de l'ordonnance terminée, cliquez sur le bouton « **Imprimer** » pour faire l'analyse de l'ordonnance par Vidal et l'imprimer.
 - Dans un premier temps, la fenêtre d'analyse du Vidal apparaît et affiche toutes les caractéristiques du patient et de l'ordonnance, avec les alertes sur les contre-indications, les interactions, les posologies et les effets indésirables.
 - Cliquez sur le bouton « **Continuer** » pour accéder à la fenêtre d'impression de l'ordonnance.

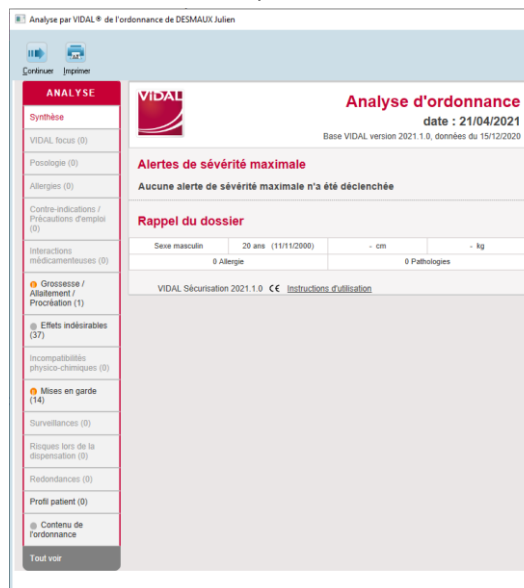


Dans la fenêtre d'impression :

- Vérifier le contenu de l'ordonnance
- Renseigner éventuellement sur chaque ligne de médicament le motif de prescription
 - Pour cela, sélectionner le médicament
 - Sélectionner ensuite dans la liste déroulante « Motif médicament » le motif à associer au médicament puis cliquer sur le bouton « **Modifier** »

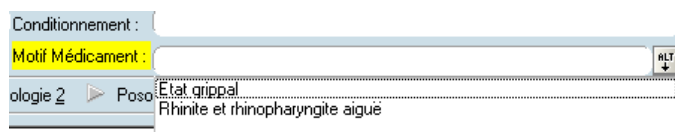

- Pour terminer, cliquer au choix sur le bouton :
 - « **Quitter** » pour abandonner l'ordonnance en cours
 - « **Imprimer** » pour lancer l'impression de l'ordonnance
 - « **Mémoriser** » pour enregistrer l'ordonnance en tant qu'ordonnance type

- L'ordonnance imprimée contient les informations du cabinet, la date, le nom et l'âge du patient, la liste et le nombre des médicaments prescrits.
- L'ordonnance est enregistrée dans :
 - les « **ordonnances du patient** » accessibles en sélectionnant « **Ordonnance du patient** »

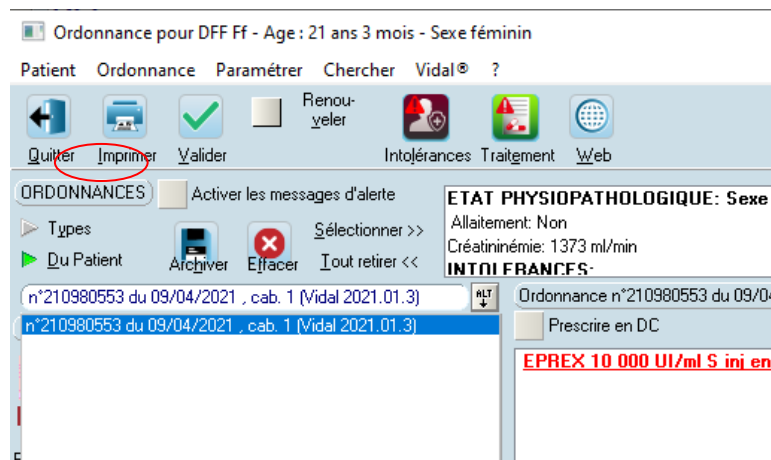

- dans les traitements du patient, avec les posologies et les motifs de prescription, accessible en cliquant sur le bouton « **Traitement** »



5. Comment insérer l'âge du patient et le nombre de médicaments prescrits sur les ordonnances

L'ordonnance doit indiquer lisiblement les nom et prénoms, le sexe, la date de naissance du patient.

a) Avec le traitement de texte de Julie


- Cliquez sur le bouton « **Courrier** » de la fiche patient.
- Cliquez sur « **Fichiers** » puis « **Ouvrir** ».
- Sélectionnez ensuite dans la liste l'ordonnance que vous souhaitez modifier.
- Commencez par placer le curseur à l'endroit où vous voulez mettre un champ de fusion dans le texte, puis cliquez sur le bouton droit de la souris. La liste des champs de fusion disponibles apparaît dans une petite fenêtre.
- Sélectionnez soit « **Age du patient (Ans/Mois)** » ou « **Naissance (Date)** » ou/et « **Nb de médicaments prescrits** », puis double-cliquez dessus (ou cliquez sur le bouton « **Envoyer** »). La fenêtre de sélection se referme automatiquement et le champ de fusion choisi vient s'intercaler automatiquement dans le texte, à l'emplacement où était situé le curseur avec un espace supplémentaire situé après afin d'éviter que le champ soit accolé à la suite du texte.
- Cliquez sur « **Fichiers** » puis « **Sauver** » pour sauvegarder le document.

b) Avec le logiciel Word

- Pour ouvrir un document existant, cliquez sur le menu « **Fichier** » et sélectionnez l'option « **Ouvrir** ».



- La liste des fichiers enregistrés sur votre disque apparaît alors à l'écran.
- Double-cliquez sur l'ordonnance que vous souhaitez ouvrir.
- Pour insérer des champs de fusion, cliquez sur le menu « **Julie** » ou « **Compléments Julie** » puis « **Julie** » et choisissez l'option « Insérer des champs de fusion » ou cliquez sur la barre d'outils Julie sur le bouton.
- La fenêtre suivante apparaît alors à l'écran.

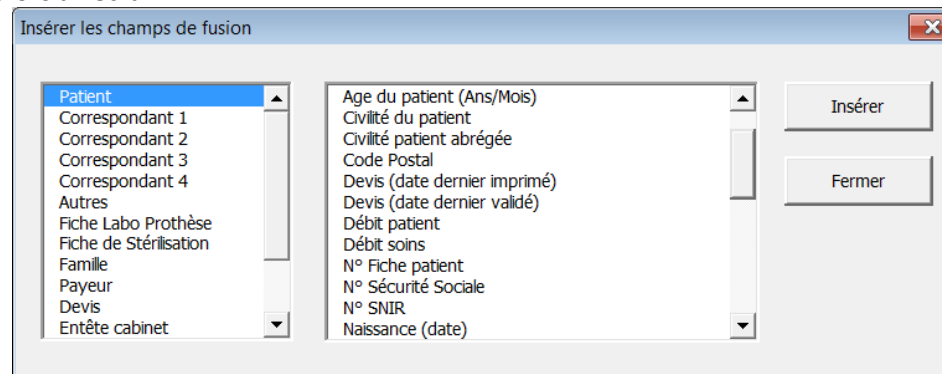


- Cette fenêtre est divisée en deux:
- La partie gauche de l'écran représente les différentes catégories de classement des champs de fusion.
- La partie droite affiche les champs de fusion de la catégorie sélectionnée.
- Sélectionnez dans la partie gauche de l'écran la catégorie « Patient »
- Sélectionnez dans la partie droite de l'écran soit « **Age du patient (Ans/Mois)** » ou « **Naissance (Date)** » et / ou « **Nb de médicaments prescrits** »




- Cliquez sur le bouton « **Insérer** » ou double-cliquer sur le champ de fusion.
- Le champ suivant apparaît alors dans le document
- Une fois les différents champs insérés, cliquez sur le bouton « **Fermer** » et enregistrez votre document.

6. Renouveler une ordonnance

- Cette fonction permet de prescrire des médicaments à partir d'une ordonnance du patient.
- Pour cela, cliquez sur le bouton « **Ordonnance** » de la fiche patient.
- Sélectionnez ensuite dans la liste "Ordonnance du patient », l'ordonnance à renouveler
- Cochez la case « **Renouveler** » en haut à gauche de la fenêtre pour activer la saisie de cette ordonnance : l'ajout d'un médicament est alors possible ainsi que la saisie des posologies.
-  : si la case « **Renouveler** » n'est pas cochée, l'ordonnance ne peut être modifiée
- Etablir l'ordonnance et l'imprimer.

7. Renouveler un traitement

- Cliquez sur le bouton « **Ordonnance** » de la fiche patient, puis sur le bouton « **Traitement** ».
- Sélectionnez le médicament dans la liste de gauche et cliquez sur le bouton « **Répéter** » au-dessus de la liste. Le médicament et sa posologie sont alors ajoutés dans l'ordonnance en cours.

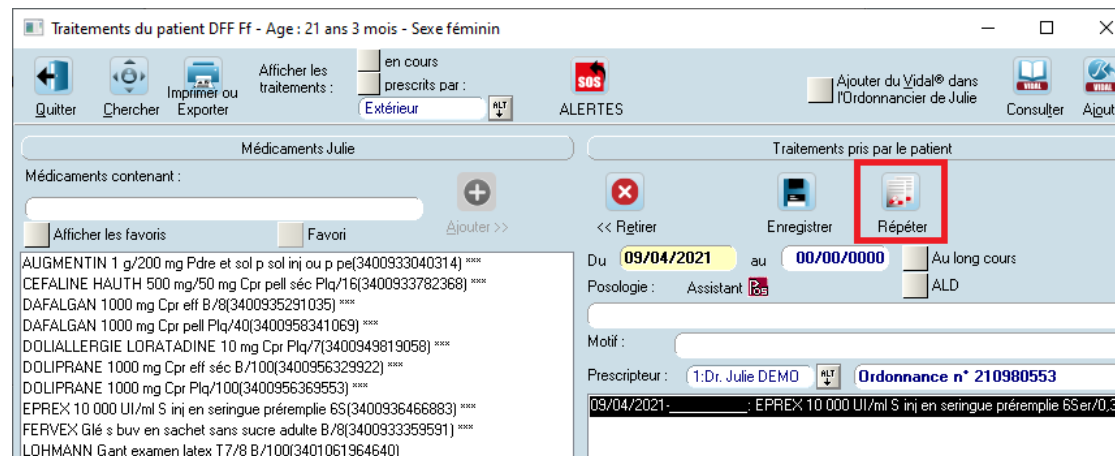

Traitements du patient DFF Ff - Age : 21 ans 3 mois - Sexe féminin

en cours
prescrits par : Extérieur

ALERTES

Ajouter du Vidal® dans l'Ordonnancier de Julie

Consulter Ajouter

Médicaments Julie

Traitements pris par le patient

Médicaments contenant :

AUGMENTIN 1 g/200 mg Pdre et sol p sol inj ou p pe(3400933040314) ****
 CEFALINE HAUTH 500 mg/50 mg Cpr pell séc Plq/16(3400933782368) ****
 DAFALGAN 1000 mg Cpr eff B/8(3400935291035) ****
 DAFALGAN 1000 mg Cpr pell Plq/40(3400958341069) ****
 DOLIALLERGIE LORATADINE 10 mg Cpr Plq/7(3400949819058) ****
 DOLIPRANE 1000 mg Cpr eff séc B/100(3400956329922) ****
 DOLIPRANE 1000 mg Cpr Plq/100(3400956369553) ****
 EPREX 10 000 UI/ml S inj en seringue préremplie 6S(3400936466883) ****
 FERVEX Glé s buv en sachet sans sucre adulte B/8(3400933359591) ****
 LOHMANN Gant examen latex T7/8 B/100(3401061964640)

<< Retirer Enregistrer **Répéter**

Du 09/04/2021 au 00/00/0000 Au long cours


Posologie : Assistant ALD

Motif :

Prescripteur : 1:Dr. Julie DEMO Ordonnance n° 210980553


09/04/2021- : EPREX 10 000 UI/ml S inj en seringue préremplie 6S er/0,3ml

8. Rechercher les traitements d'un patient

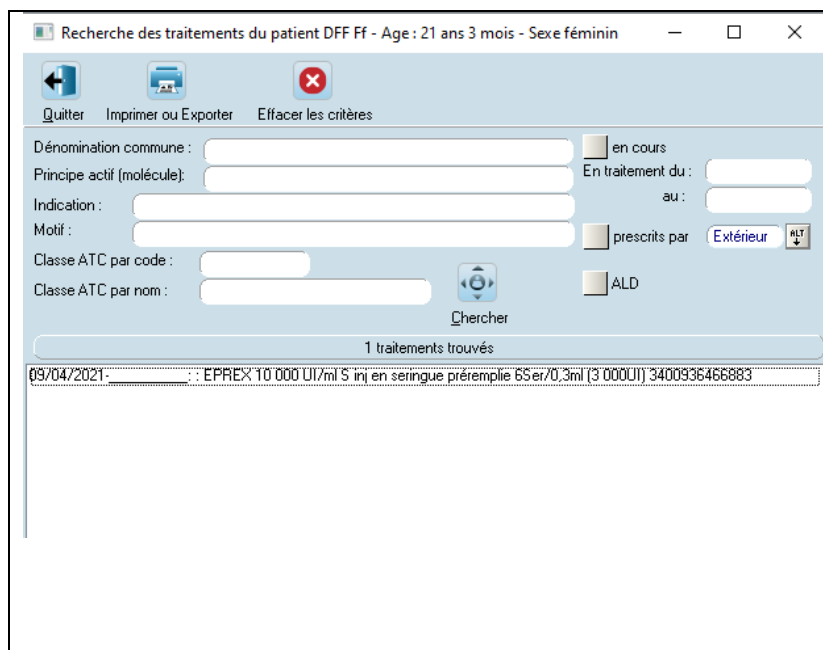

- Cliquez sur le bouton « **Ordonnance** » de la fiche patient, puis sur le bouton « **Traitement** ».
- Cliquez sur le bouton « **Chercher** »
- Indiquez le critère de recherche parmi :
 - La dénomination commune
 - Le principe actif
 - L'indication
 - Le motif
 - Le code de classe ATC (Anatomique, thérapeutique et chimique)
 - Le libellé de classe ATC
- Cliquez ensuite sur le bouton « **Chercher** », la liste des traitements du patient apparaît dans la liste.
- Un bouton vous permet d'imprimer ou d'exporter au format CSV ou TXT le résultat de votre recherche

9. Rechercher les patients prenant un traitement


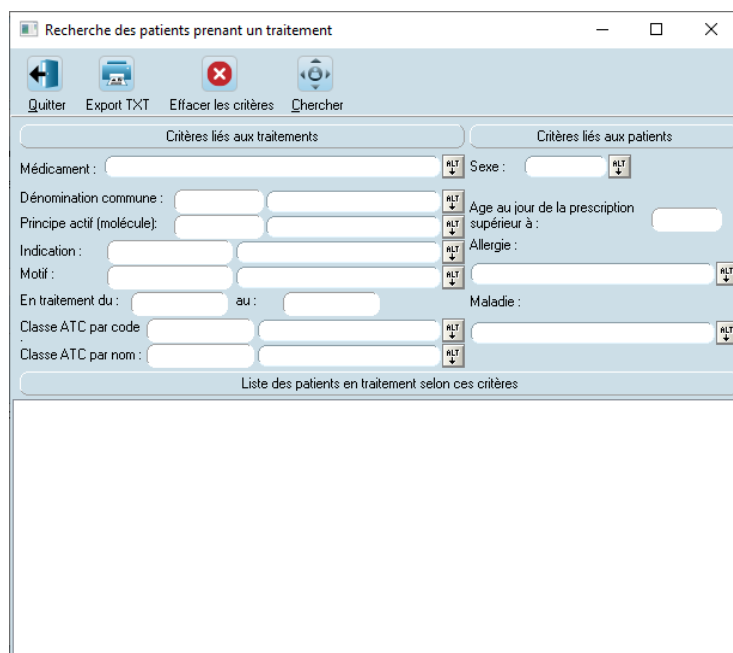


- Cliquez sur le bouton « **Ordonnance** » de la fiche patient puis cliquez sur le menu « **Chercher / Patients prenant un traitement** »
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez les critères de recherche parmi :
 - La molécule
 - Le motif
 - L'indication
 - Le code de classe ATC
 - Le libellé de classe ATC
 - La date de début de traitement
 - La date de fin
 - Le sexe du patient
 - L'âge du patient
- Saisir les critères et cliquez sur le bouton « **Chercher** », la liste des patients concernés apparaît dans la liste.
 - Le bouton « **Export TXT** » permet de créer un fichier au format texte contenant la liste des patients.

10. Pharmacovigilance

Si vous avez besoin de faire une déclaration d'effet indésirable susceptible d'être dû à un médicament, cliquez sur le menu « ? / Pharmacovigilance » depuis le module Ordonnance.

G. Remarques
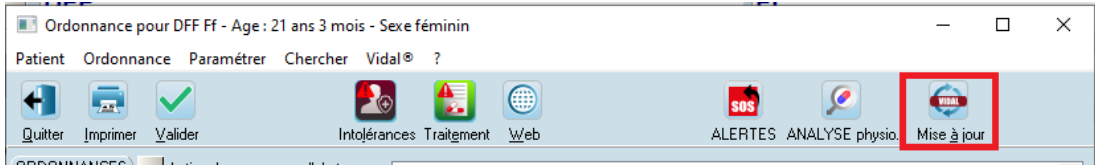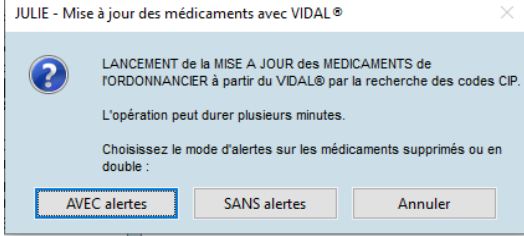
<p>Si le Vidal n'est pas installé sur le poste, affichage du message ci-contre</p>	<p>ATTENTION ! Le niveau de sécurité défini est inférieur aux préconisations de la HAS. Veuillez installer le VIDAL®.</p>
<p>Lancement de la mise à jour assistée des médicaments Julie à partir du Vidal :</p> 	



Guide des pannes

Si vous constatez un fonctionnement anormal de votre logiciel :

- Lire votre notice d'utilisation
- Connectez-vous au site internet www.julie.fr, rubrique assistance
- Contactez votre service technique au 01 60 93 73 73. (Prix d'un appel local)

